





HART LONG
CENTRUM LEIDEN



withings Sleep
Sleep Tracking Mat

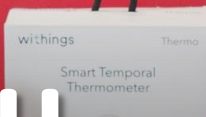

withings Thermo
Smart Temporal Thermometer

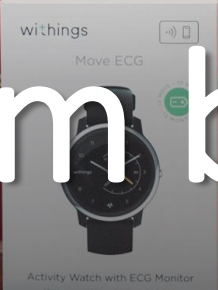

withings Move ECG
Activity Watch with ECG Monitor



withings WiFi Smart Blood Pressure Monitor

Welkom bij de Installatie van de

Mission-Infarct Box



THE BOX

THUISMETING VOOR HARTPATIENTEN

VOORDAT U BEGINT WAT BELANGRIJKE ZAKEN.

1. Lees eerst de gehele handleiding door voordat u zelf een app of apparatuur installeert.
2. Log in met de gegevens die u van het ziekenhuis krijgt. Dit is het e-mailadres wat eindigt op @hlc.nl. Gebruik **NOOIT** uw eigen e-mailadres.
3. U ontvangt eenmalig binnen **3 weken** na het installeren van uw box een bericht of uw metingen goed bij ons binnenkomen.
4. Heeft u zelf moeite met de installatie, vraag dan op voorhand hulp van iemand uit uw directe omgeving (familielid/ kennis).
5. De LUMC care app is nog in testfase, graag uw begrip hiervoor.
6. Komen uw gegevens niet direct in de LUMC care app dan kunt u eerst de Withings app openen.
7. Voor een betere connectie tussen de Withings app en de LUMC care app installeer de bloeddrukmeter, thermometer en weegschaal via uw Wi-Fi netwerk.
8. Uw ECG is niet te zien in de LUMC care app, wel in uw Withings app.



Wat voor apparatuur zit er in uw Box

De apparatuur die u van het ziekenhuis heeft gekregen krijgt u in bruikleen en gebruikt u gedurende het traject "The Box". Bewaar de originele verpakking van de apparatuur. De termijn hiervan bespreekt u met uw behandelend specialist.

Mocht u er geen gebruik meer van maken dan kunt u contact opnemen met de Box Support door te mailen naar boxsupport@lumc.nl.


App installatie

U start met de installatie van de apps.

Zorg dat uw Wi-Fi of 4G/5G aan staat anders kunnen de apps niet gedownload worden.

Voor het aanzetten van uw Wi-Fi gaat u naar de instellingen van uw telefoon.

Bij iedere telefoon werkt het anders om de Wi-Fi aan te zetten. Kunt u het niet vinden, vraag dan iemand in uw omgeving om hulp.

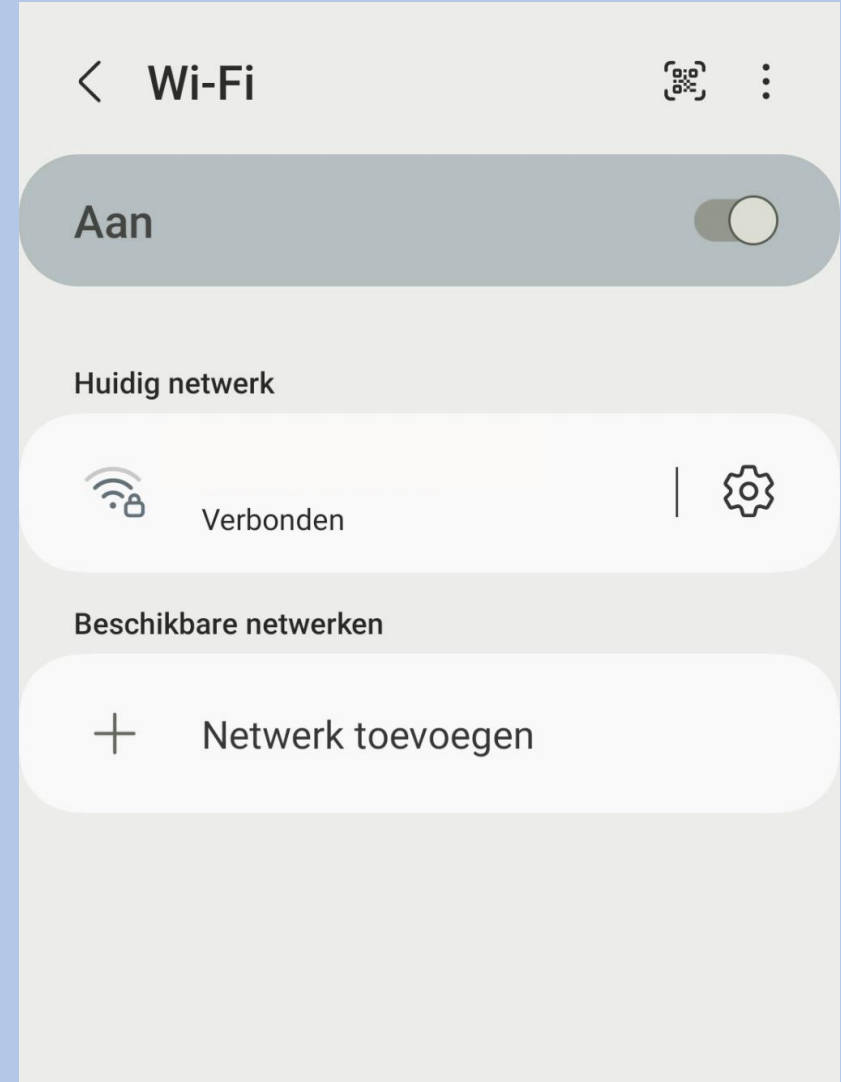


Apps installeren

Withings Health Mate app


1. U gaat naar de **Playstore** .
2. Selecteer in de zoekbalk **Withings Health Mate** in en selecteer installeren, zie afbeelding 1.
3. De **Withings Health Mate app** wordt nu geïnstalleerd op uw telefoon/tablet.

LUMC Care app

1. U gaat naar de **Playstore** .
2. Selecteer in de zoekbalk **LUMC Care app** in en selecteer installeren, zie afbeelding 2.
3. De **LUMC Care app** wordt nu geïnstalleerd op uw telefoon/tablet.

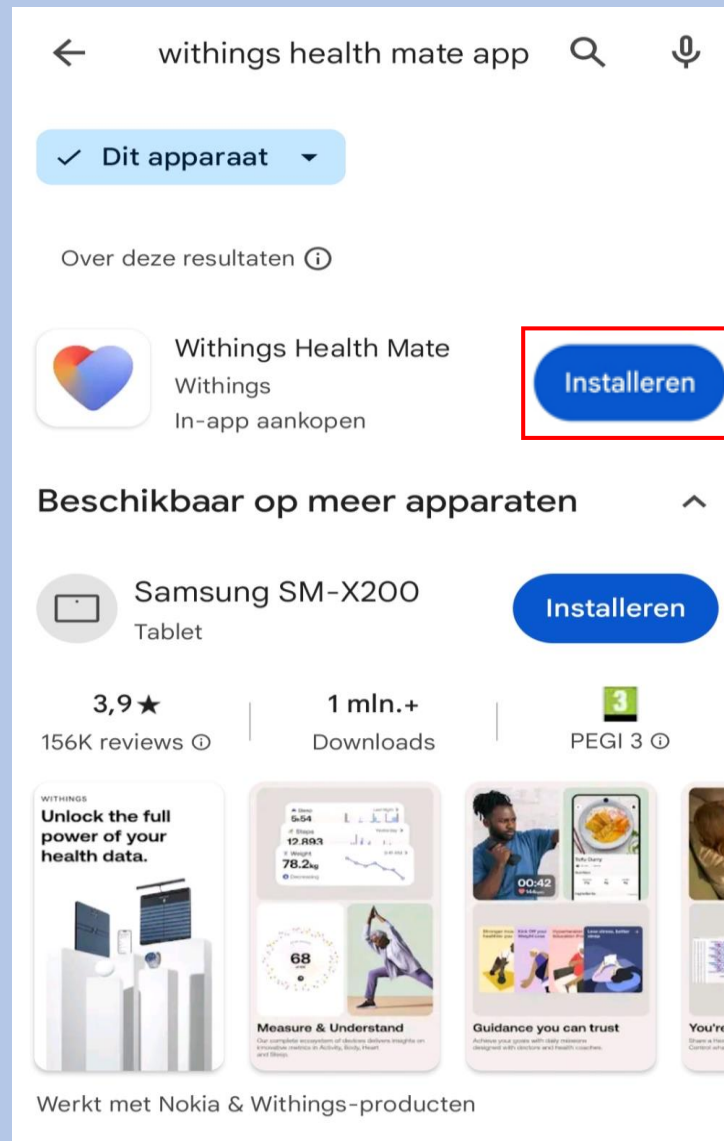

1

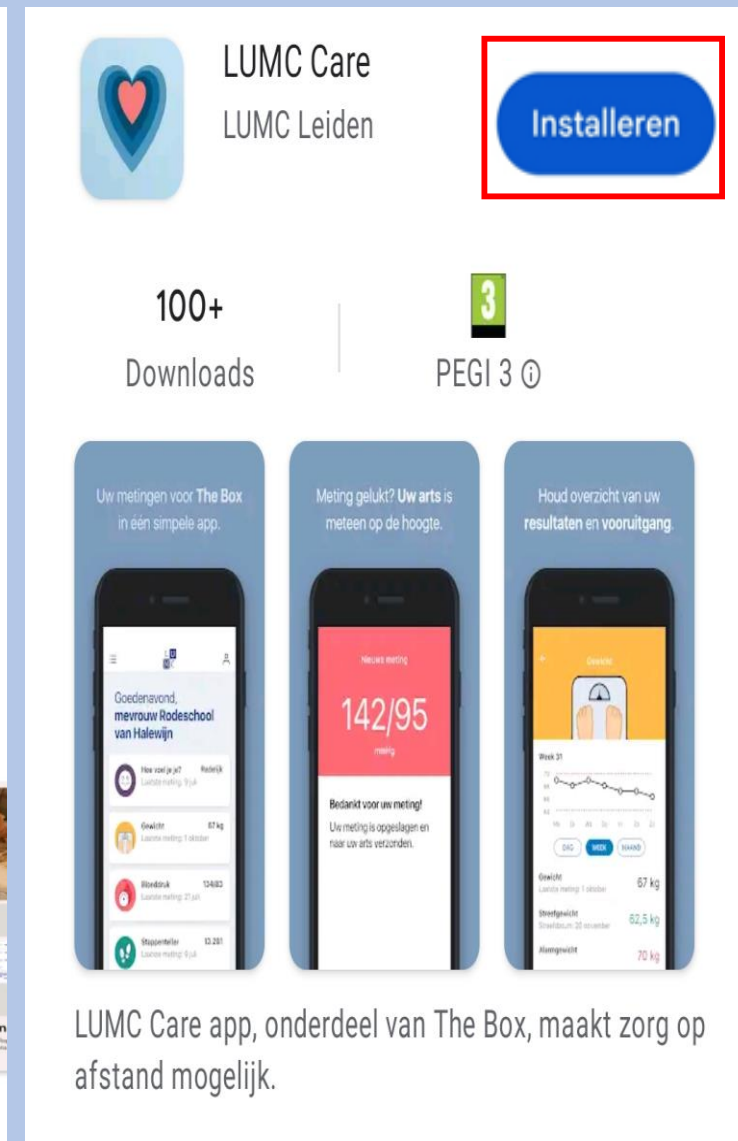

2


LUMC Care app, onderdeel van The Box, maakt zorg op afstand mogelijk.

Withings inloggen

Selecteer **Doe mee met Withings app**



Voer het e-mail adres in dat u van het ziekenhuis heeft gekregen, dit eindigt op hlc.nl (zie afbeelding1) Selecteer **Doorgaan**

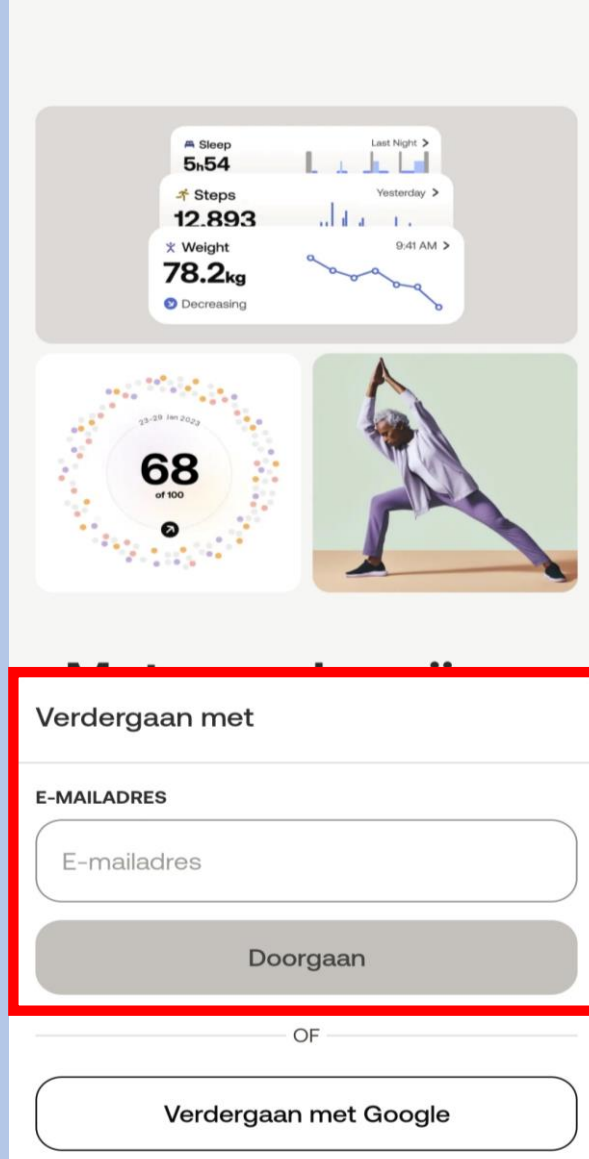

Selecteer het kleine zinnetje **Zie opties**



Afbeelding 1



Selecteer **Inloggen met wachtwoord** en **Volgende**

×

Controleer uw e-mail

We hebben net een tijdelijke identificatiecode verzonden naar angelinakeizer@hotmail.com.

IDENTIFICATIECODE

Voer de identificatiecode in

Ik heb de code niet ontvangen. [Zie opties →](#)

Hulp nodig?

De code opnieuw verzenden

Inloggen met wachtwoord

Volgende

Voer het wachtwoord in dat u van het ziekenhuis heeft gekregen, dit staat vermeld op uw afgifteformulier; zie afbeelding 1. Selecteer vervolgens **Volgende**

←

Voer uw wachtwoord in

WACHTWOORD

Voer hier uw wachtwoord in

~~Bent u uw wachtwoord vergeten? Ontvang een tijdelijke code per e-mail om in te loggen →~~

Volgende

Afbeelding 1

Leids Universitair Medisch Centrum
TheBox!

Patientgegevens

Account

Uw persoonlijke accountgegevens

Inlognaam: _____

Wachtwoord: _____


Gebruik deze gegevens om in te loggen of accounts aan te maken in de benodigde applicatie.


*TheBox en de apparaten zijn geen vervanging voor spoedeisende zorg!
Heeft u spoedeisende zorg nodig, bel dan het alarmnummer 112*

Op www.hartlongcentrum.nl/thebox ziet u onder Handleidingen hoe u stap voor stap de apparaten kunt installeren.

www.hartlongcentrum.nl/thebox

Technische ondersteuning: Rijk bij problemen eerst op www.hartlongcentrum.nl/thebox onder Veelgestelde vragen. Kort u er dan nog niet uit: boxsupport@lum.nl - 071-5307604 (aansluiting van maandag t/m vrijdag van 9 tot 12 uur)

Selecteer  om een apparaat toe te voegen aan de app

+ 

Goedemiddag Angelina ,

Bluetooth-toestemming inschakelen

Toegang tot bluetooth is nodig om uw apparaten te verbinden en te installeren

Om

2 Meldingen

Laatste metingen

Stappen

14:03 >

Thuis Meten Presteren

Apparatuur installeren van Withings


Nu gaat u het volgende installeren:

- Weegschaal
- Bloeddrukmeter
- Scanwatch 2

Let op! Mocht u het apparaat niet hebben scroll dan door naar de volgende.

Nu gaat u de weegschaal installeren vervolg het stappenplan.



Selecteer rechts bovenin  Om een apparaat te koppelen



Goedemiddag
Angelina ,



Bluetooth-toestemming inschakelen

Toegang tot bluetooth is nodig om uw apparaten te verbinden en te installeren

Om

 2 Meldingen

Laatste metingen

Stappen

14:03 >



Thuis




Meten



Presteren


Selecteer **Installeer een apparaat**

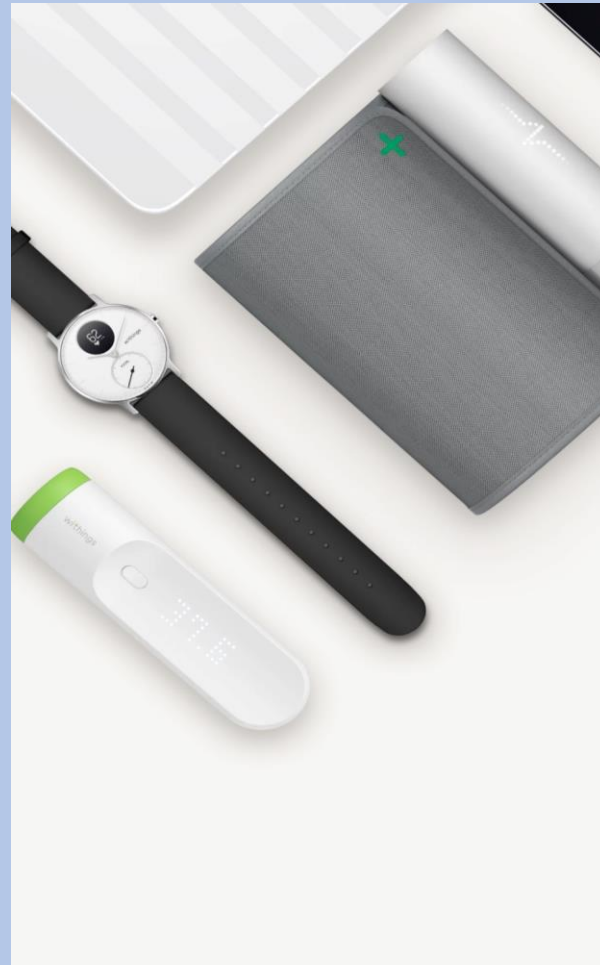

Installeer een apparaat

Ontdek onze Health Products

Selecteer **Weegschalen**

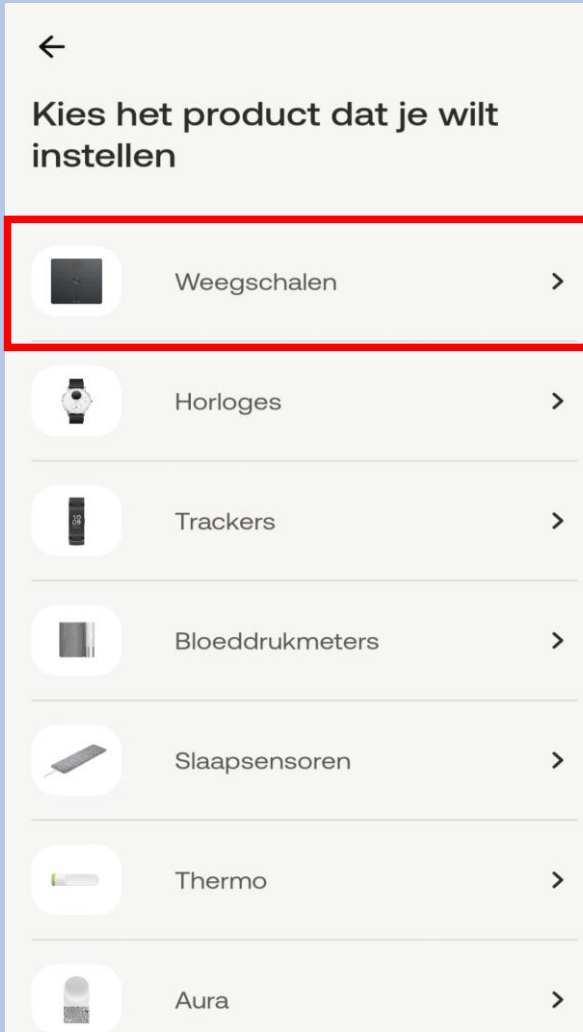

Kies het product dat je wilt instellen



Weegschalen >



Horloges >



Trackers >



Bloeddrukmeters >



Slaapsensoren >




Thermo >



Aura >

Selecteer **Body**

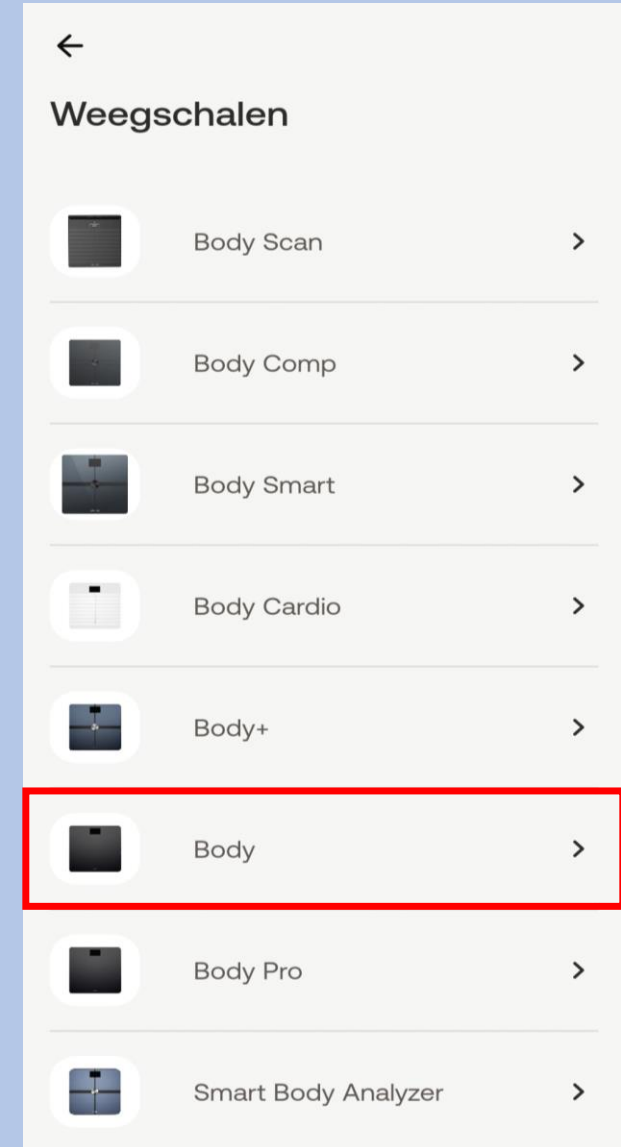

Weegschalen



Body Scan >



Body Comp >



Body Smart >



Body Cardio >



Body+ >



Body >




Body Pro >




Smart Body Analyzer >

Selecteer **Installeren**

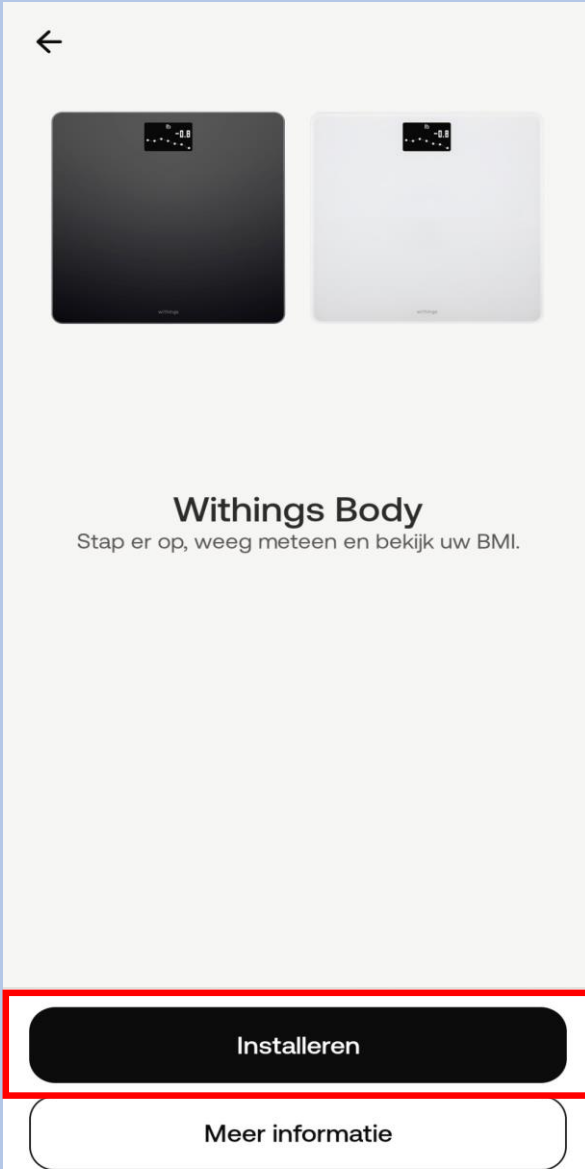

1. U haalt de **Weegschaal** uit de doos.
2. Onder op de **Weegschaal**, bij de batterijen, vindt u een labeltje dat u er uit trekt.
3. U houdt het knopje **3 hele seconden ingedrukt**.
4. Selecteer **Volgende** op de app zoals aangegeven op de afbeelding hiernaast.

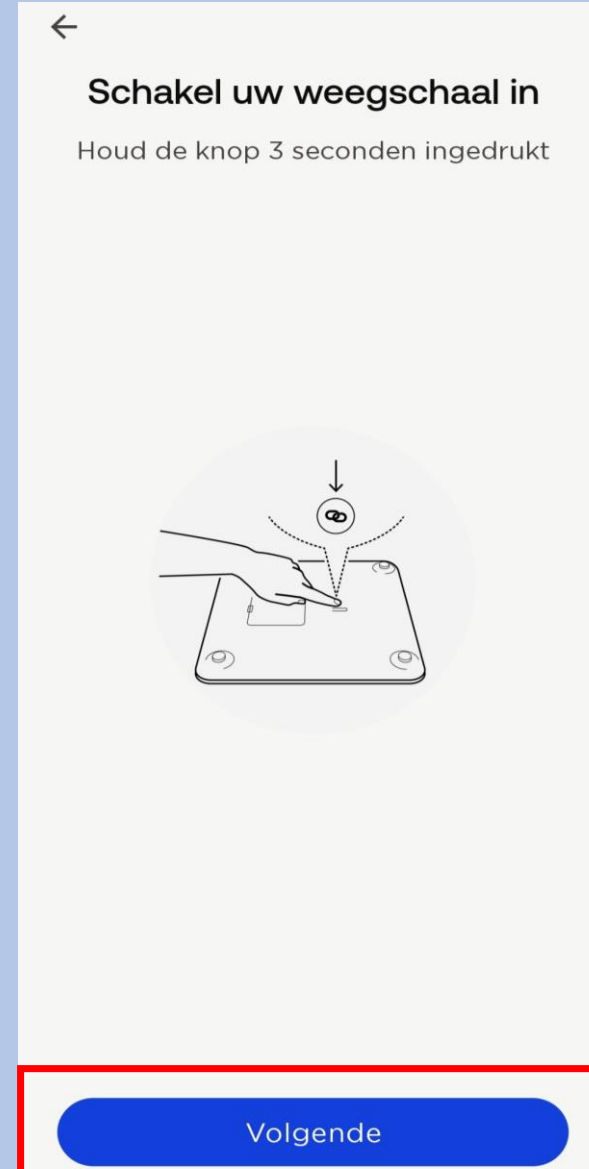

Er kan een pop up verschijnen.
Let op dit gebeurd niet bij alle
apparaten **selecteer Koppelen**

Bezig met het maken van een verbinding...

Als er geen pop-up verschijnt,
controleer dan uw meldingencentrum



Bluetooth-koppelverzoek

Koppelen aan Body 9C?

Annul.

Koppelen

Selecteer **volgende**

Body weegschaal gedetecteerd

Body 9C



Volgende

Niet uw apparaat?

Selecteer Ik heb geen Wi-Fi of
kies voor uw eigen WiFi netwerk
en over uw wachtwoord in

Wi-Fi-instelling

Instellen van een Wi-Fi-verbinding

Ik heb geen Wi-Fi-netwerk
Indien u geen Wi-Fi netwerk hebt,
worden gegevens via Bluetooth
verstuurd.

Voer onderstaande in en
selecteer **Opslaan**

← Schermen personaliseren

Inbegrepen metingen

Gewicht

— Lichaamsgewicht-index (BMI) ≡

Meer schermen

Gewichtstrend ⓘ

Weer ⓘ


Stappen ⓘ

Opslaan

Selecteer **Volgende**

De instelling is klaar!

Laten we eens kijken hoe u het meest uit uw weegschaal haalt

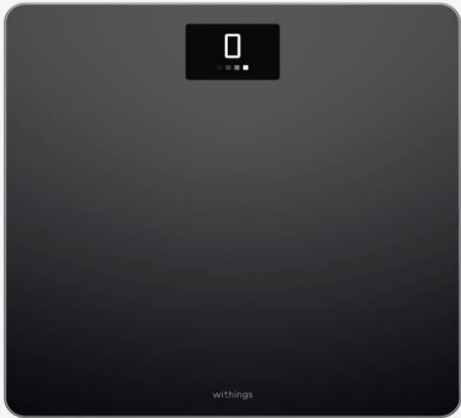


Volgende

Selecteer **Over slaan**

Een streefgewicht instellen

Of u nu zwaarder wilt worden, gewicht wilt verliezen of uw gewicht wilt behouden, het blijft altijd fantastisch om naar iets toe te werken.



Over slaan

Volgende

Selecteer **Over slaan**



Neem er de tijd voor

Er kunnen pijlen worden weergegeven om u te helpen. Het scherm knippert als u op de juiste plek staat. Blijf op de weegschaal staan tot de metingen voltooid zijn.



Over slaan

Volgende

Selecteer **OK**


Laten we het eens proberen

Het is tijd om op de weegschaal te gaan staan. Kijk hier weer na een paar minuten om uw metingen te zien.



OK

Uw **Weegschaal** is klaar voor gebruik en staat in de lijst van apparatuur

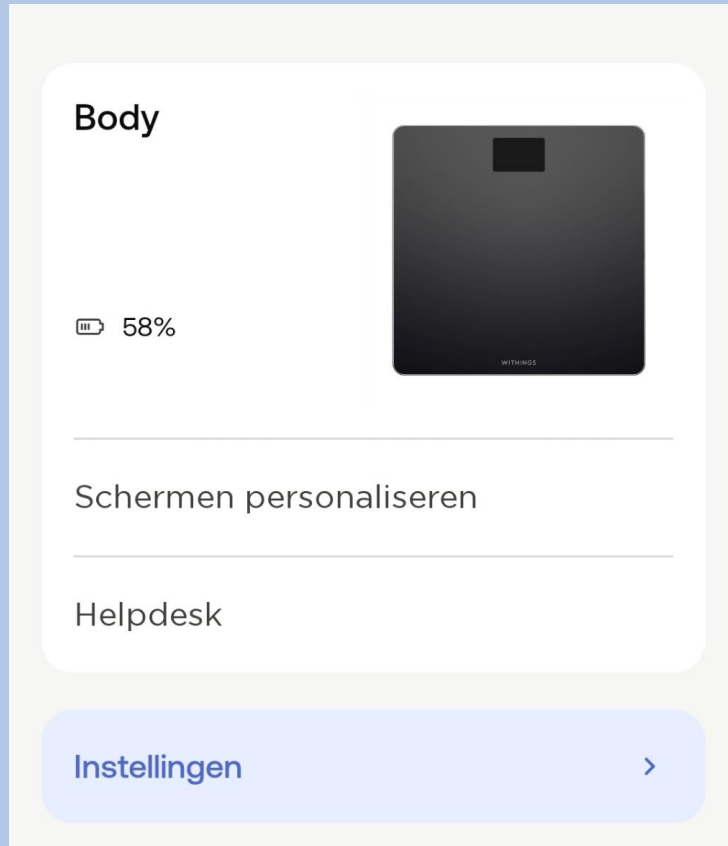

De weegschaal kan via uw Wi-Fi netwerk worden geïnstalleerd voor meer bereik.

Dit kunt u vinden via:

Apparaten → Body → instellingen → Configuratie → instellen van een Wi-Fi verbinding.

Via de weegschaal kunt u uw streefgewicht, het weer of uw BMI instellen. Dit kunt u vinden via: Apparaten → Schermen personaliseren.

In de doos vindt u pootjes voor de weegschaal, voor als u thuis vloerbedekking heeft.


Weging maken


Om een betrouwbare meting te krijgen, zijn de volgende punten belangrijk:

- Weeg dagelijks op ongeveer hetzelfde moment en onder dezelfde omstandigheden (bijvoorbeeld met of zonder kleding).
- Verplaatst u de weegschaal, wacht dan 10 seconden voordat u start met wegen.
- Staat de weegschaal op een tapijt, gebruik dan de tapijtdopjes die meegeleverd zijn bij de weegschaal.


1. Ga op de weegschaal staan.
2. U ziet het gewicht verschijnen op het schermje van de weegschaal.
3. De meting is nu ook terug te zien in de LUMC Care app; daar kan enige vertraging in zitten.




Selecteer rechts bovenin 
Om een apparaat te koppelen

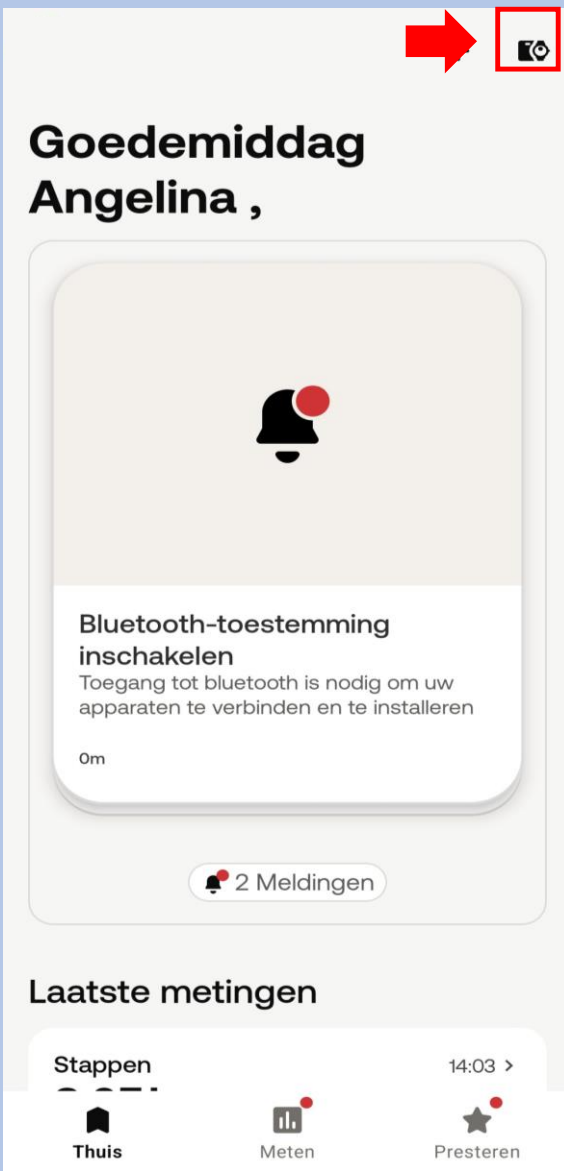


Selecteer **Installeer een apparaat**

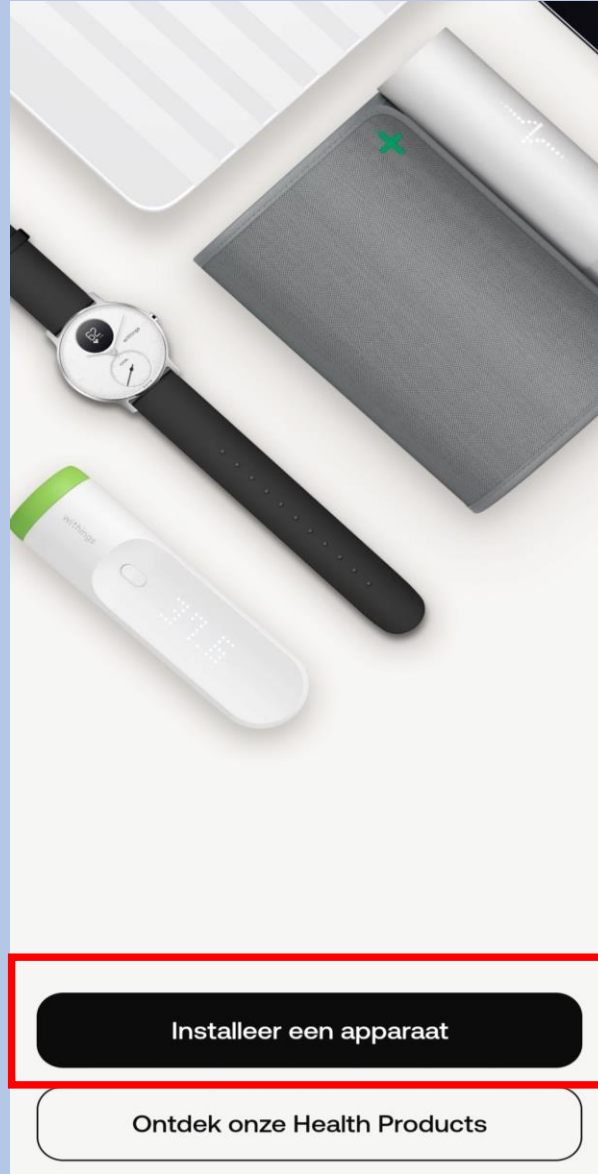

Selecteer **Bloeddrukmeter**

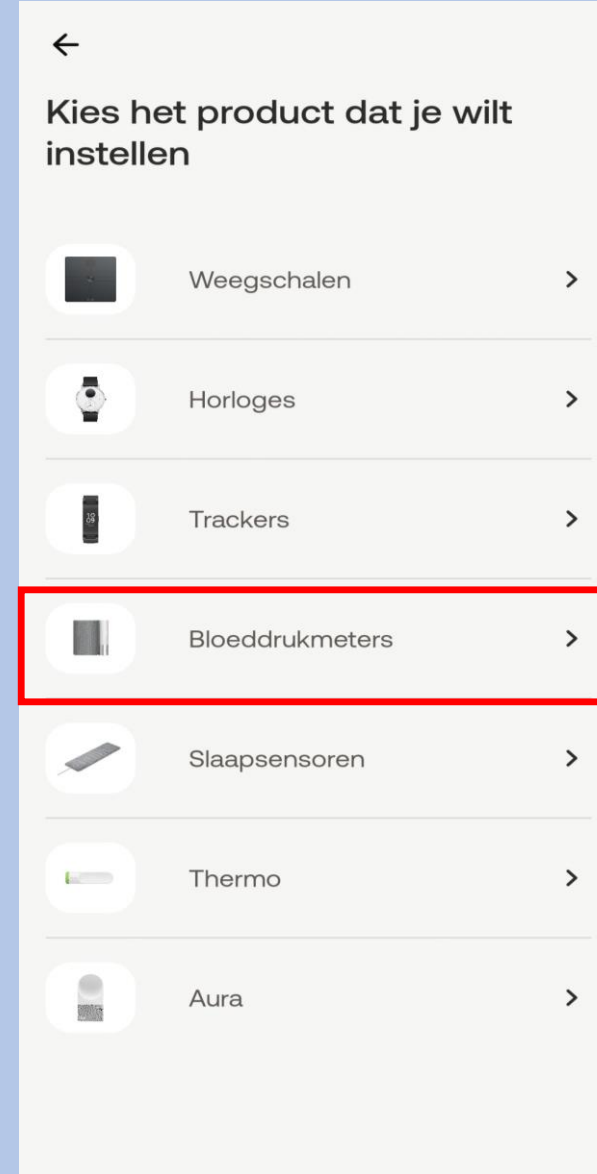

Selecteer **BPM Connect**

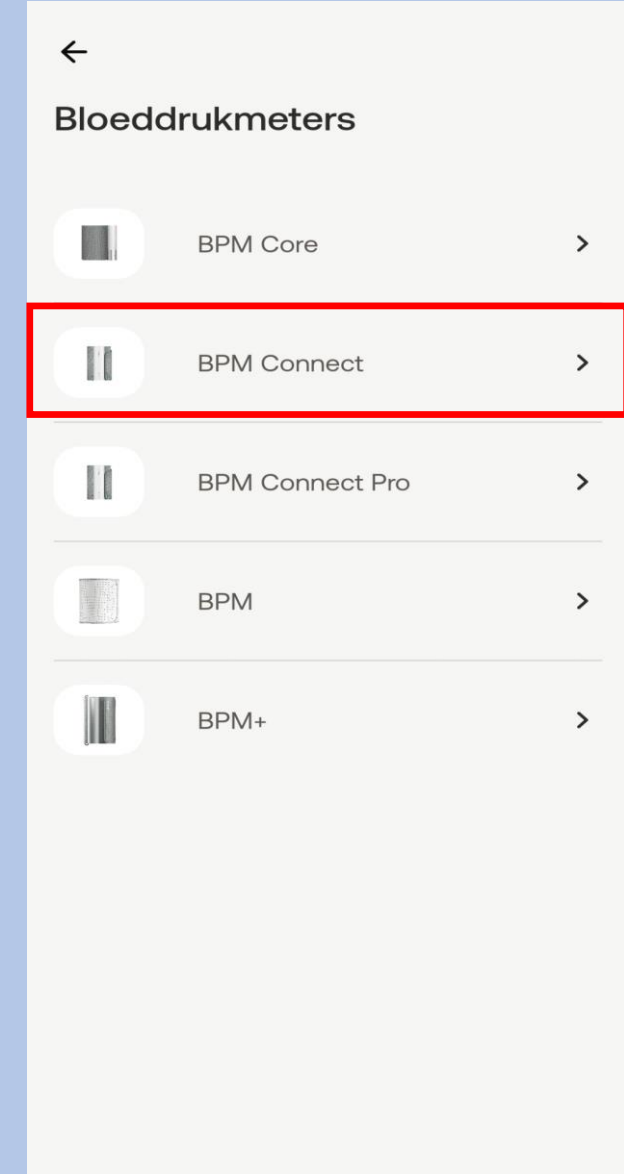

Selecteer **Installeren**



BPM Connect

Een medisch correcte bloeddrukmeting in uw vertrouwde omgeving.

Installeren

Meer informatie

Selecteer **Toestaan**




'Apparaat in de buurt'-toestemmingen

Voor Withings App moeten de 'Apparaat in de buurt'-toestemmingen ingeschakeld zijn om Withings-producten in de buurt via Bluetooth te ontdekken en er verbinding mee te maken.

Toestaan

Meer informatie

Selecteer **Toestaan**

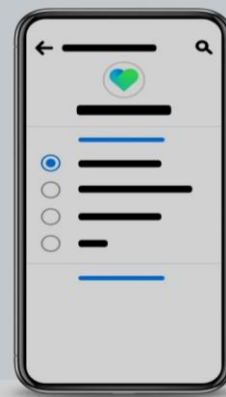

'Apparaat in de buurt'-toestemmingen

Voor Withings App moeten de 'Apparaat in de buurt'-toestemmingen ingeschakeld zijn om Withings-producten in de buurt via Bluetooth te ontdekken en er



Toestaan dat **Withings** apparaten in de buurt vindt, er verbinding mee maakt en de relatieve positie bepaalt?

Toestaan

Niet toestaan

Houd de knop op de BPMConnect ingedrukt tot er **Setup** verschijnt en selecteer dan in de app op **Volgende**



Aan de slag!

Houd de knop 3 seconden ingedrukt



Volgende

Er kan een pop up verschijnen.
Let op dit gebeurd niet bij alle apparaten

Selecteer **Volgende**

Selecteer Ik heb geen Wi-Fi of kies voor uw eigen WiFi network en over uw wachtwoord in, dit is uw eigen keus.

Selecteer **OK**

Bezig met het maken van een verbinding...

Als er geen pop-up verschijnt, controleer dan uw meldingencentrum



Bluetooth-koppelverzoek

Koppelen aan BPM Connect D4?

Annul.

Koppelen

BPM Connect gedetecteerd

BPM Connect D4



Volgende

Wi-Fi-instelling

Instellen van een Wi-Fi-verbinding

Ik heb geen Wi-Fi-netwerk
Indien u geen Wi-Fi netwerk hebt, worden gegevens via Bluetooth verstuurd.

Uw BPM Connect is er klaar voor!

We gaan u nu helpen om uw eerste bloeddrukmeting uit te voeren.



OK

Selecteer **Volgende**



Ga er, voordat u begint, even goed voor zitten en ontspan.

Ga 5 minuten rustig zitten. Houd uw rug recht, uw voeten naast elkaar op de grond (sla uw benen dus niet over elkaar) en praat niet.

Volgende

Selecteer **Volgende**




Stroop uw mouw op en doe het apparaat om uw LINKERARM.

De manchet moet direct op de huid worden geplaatst met de cilinder aan de binnenkant van uw arm. Houd de knop aan de onderkant.

Volgende

Selecteer **Volgende**

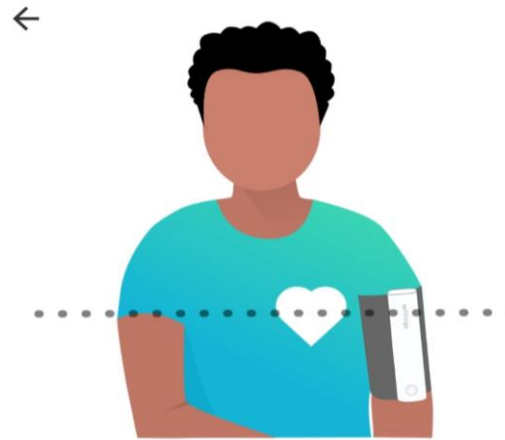

Houd BPM Connect ter hoogte van uw hart.

Voor het beste resultaat moet het Withings-logo zijn uitgelijnd met uw hart.

Volgende

Selecteer **Mijn eerste meting doen**



Laten we uw eerste meting doen

Stel de BPM af op uw arm, zoals hieronder afgebeeld. Met één druk op de knop wordt de meting ingeschakeld, met een tweede druk op de knop wordt de meting gestart.



Mijn eerste meting doen

Selecteer **OK**

Uw bloeddrukmeter is geïnstalleerd
en staat in de lijst van apparaten.




Dat is alles! De volgende keer hebt u uw telefoon hier niet meer bij nodig.

Hopelijk was alles duidelijk en hebt u het proces zonder problemen kunnen doorlopen. U kunt deze uitleg overigens altijd opnieuw raadplegen in het onderdeel Apparaten van de Health Mate-app.

OK

BPM Connect



32%

Wi-Fi-instelling

x3 meetintervaltijd **60sec**

Helpdesk

Instellingen >

Informatie over de bloeddrukmeter

Uw bloeddrukmeter kan via uw Wi-Fi netwerk geïnstalleerd worden voor meer bereik. Dat kunt u op de volgende manier doen:
Apparaten → Wi-Fi – instelling

De bloeddrukmeter loopt op een accu die in de app aan geeft wanneer de accu bijna leeg is. Via de kabel kunt u de bloeddrukmeter opladen. Deze zit in het doosje van de bloeddrukmeter. Gooi uw doosje niet weg!

De bloeddrukmeter heeft twee functies:
1 x meten of 3 x meten.
1 x meten is voldoende.



Bloeddrukmeting maken

Om een betrouwbare meting te krijgen, is het belangrijk dat u ontspannen bent. Vermijd activiteit, eten, drinken, roken of een bad 30 minuten voor de meting.

Meet circa twee uur na de inname van uw medicatie, zo kan de zorgverlener zien wat de medicatie doet met uw bloeddruk.

1. Zorg ervoor dat u prettig zit en ontspannen bent:

- Beide benen op de grond
- Verwijder kleding die u bovenarm bedekt (mouwen niet oprollen)
- Blijf 5 minuten zo zitten voordat u start met meten

2. Wikkel de grijze manchet om uw linker bovenarm.

Het apparaat moet aan de binnenkant van uw arm zitten op uw ader, ter hoogte van uw elleboog.

3. Leg uw arm op de tafel zodat uw arm op dezelfde hoogte is als uw hart.


4. Druk op het knopje van de BPM, u ziet dan een plusje verschijnen. Vervolgens staat er BPM. Druk vervolgens kort nog 1 keer op de knop, de BPM start met het maken van een meting.


5. De meting wordt aangegeven op de BPM. Druk de knop nogmaals in en er verschijnt nu het woord Box. Druk nogmaals wat langer de knop in en er verschijnt dan een vinkje dat het gelukt is.

6. De meting is nu terug te zien in de LUMC Care app en wordt doorgestuurd naar uw elektronisch patiëntendossier.


Let op: Uw bloeddrukmetingen zijn het meest betrouwbaar wanneer u telkens dezelfde arm gebruikt voor de meting en tijdstip.




Selecteer rechts bovenin  Om een apparaat te koppelen

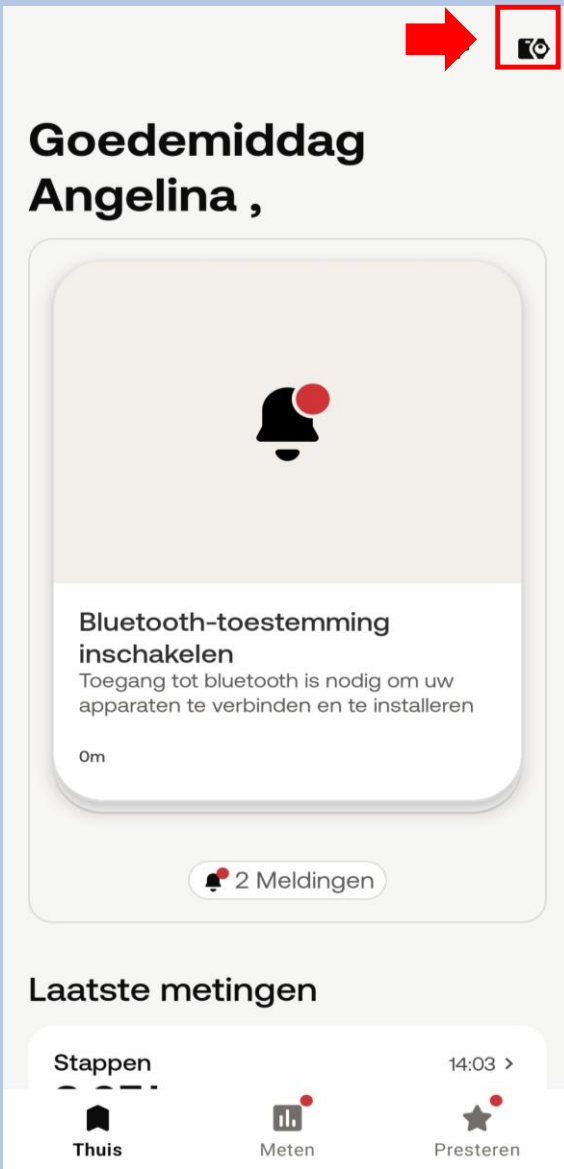


Selecteer **Installeer een apparaat**

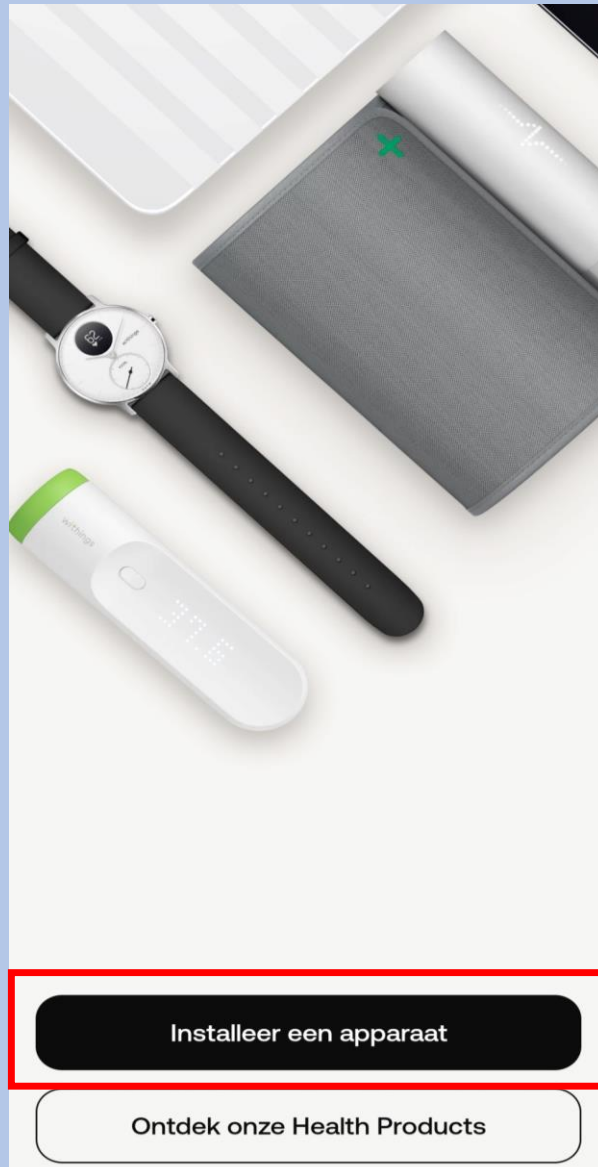

Selecteer **Horloges**

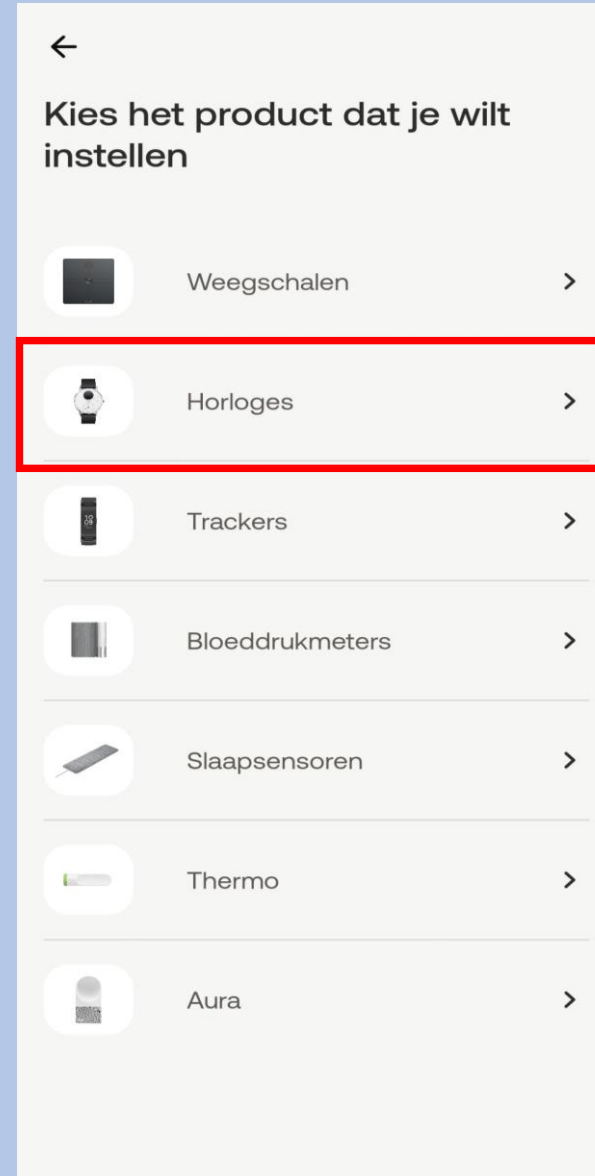

Selecteer **Scanwatch 2**


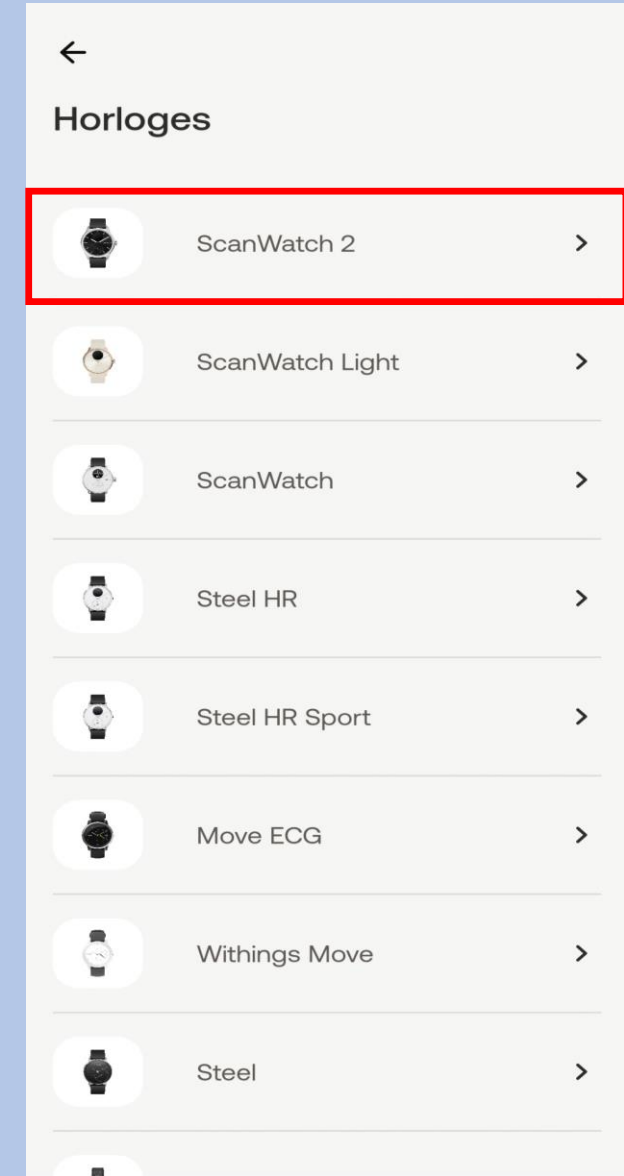


Selecteer **Installeren**

Druk eenmaal op de knop van uw Scanwatch
en op het scherm van uw horloge
verschijnt **“Hello setup”** ga direct
naar de volgende screenshot
Selecteer **Ik zie “INSTELLEN”**

Er kan een pop up verschijnen. Let
op dit gebeurd niet bij alle
apparaten **Selecteer dan koppelen**

Selecteer **volgende**

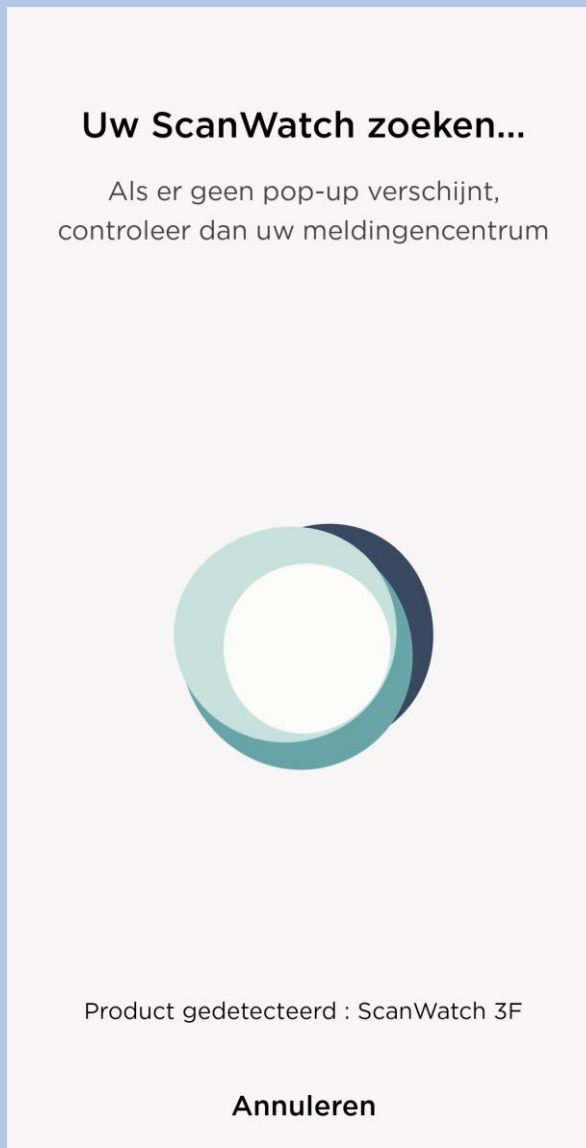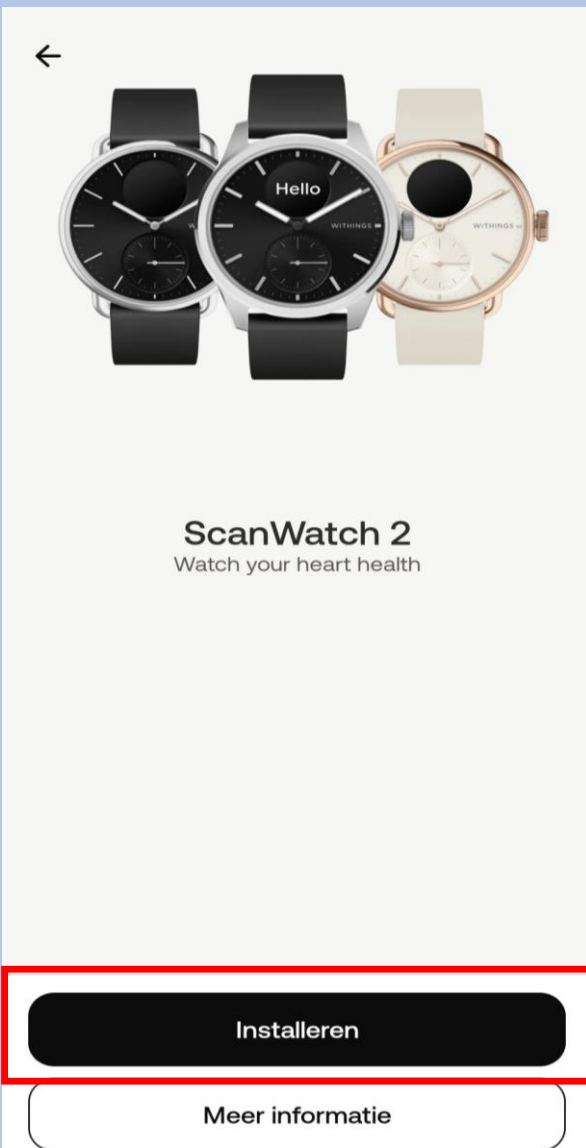

Nu zal er een **code verschijnen op uw horloge** die u invoert op uw telefoon/tablet. Let op! negeer de tekst 0000 of 1234 dit klopt niet. Voer de pincode in en selecteer koppelen, vervolgens **Pair**

Koppel uw ScanWatch 2 met uw telefoon

Laten we het via Bluetooth aan uw telefoon koppelen. Misschien moet u de code op uw horlogeschermb in de volgende pop-up invoeren.



Pair

Koppel uw ScanWatch 2 met uw telefoon


Laten we het via Bluetooth aan uw telefoon koppelen. Misschien moet u de code op uw horlogeschermb in de volgende pop-up invoeren.

Bluetooth-koppelverzoek

Geef pincode in om te koppelen met ScanWatch 2 48 (probeer 0000 of 1234).

Pincode
Gewoonlijk 0000 of 1234

Annul. | Koppelen

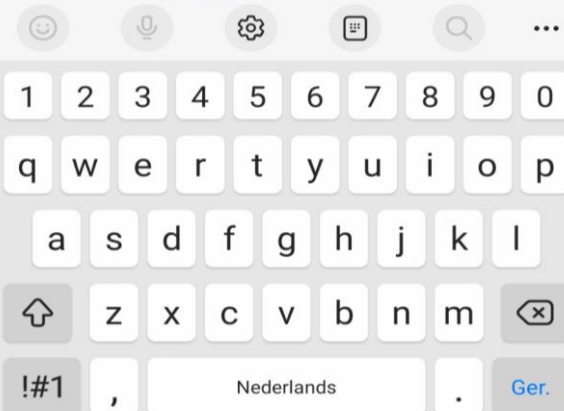

Selecteer **volgende**

Verbonden met uw ScanWatch 2



Volgende

Selecteer uw **Box naam**

Wie zal dit apparaat gebruiken?

Box

Annuleren

Uw horloge zal nu updaten.
Let op niet elk horloge heeft
aan het begin een update
nodig

0%

We updaten ScanWatch om u de
nieuwste ervaring te kunnen bieden.
Houd de toepassing open totdat de
update voltooid is.



Uw horloge word opnieuw
opgestart. Soms kan dit
enige tijd duren

Uw ScanWatch 2 wordt
opnieuw opgestart...



Selecteer **Ja** als de wijzers
omhoog staan

Wijzen de wijzers van het
horloge omhoog?

De uren- en minutenwijzers moeten
op de 12 staan en de bewegingswijzer
moet op 100% staan



Nee

Ja

Selecteer **Volgende**

Uw horloge toont nu de juiste
tijd.



Nog eens
proberen

Volgende

Uw horloge word geconfigureerd
Dit kan even duren

Uw ScanWatch 2 wordt
geconfigureerd...



Selecteer **Volgende**

Uw ScanWatch 2 is er klaar
voor!

We leiden u nu door een aantal
functies van uw horloge.




Volgende

Selecteer de pols waaraan u het
horloge gaat dragen.
Let op dat u bij het maken van een
ECG u het horloge aan de opgegeven
pols draagt



Om welke pols gaat u uw
apparaat dragen?

Geef aan om welke pols u uw horloge
draagt.

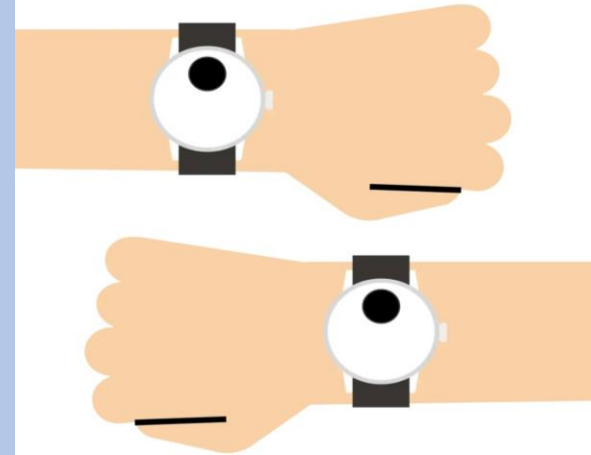

Linkerpols

Rechterpols

Selecteer **Begrepen**

Zo moet ScanWatch 2
worden gedragen.

Uw horloge moet een vingerbreedte
boven uw polsbeen aan uw pols
worden vastgemaakt. Het dragen van
een zachte polsband verbetert de
automatische metingen.



Begrepen

Laten we ScanWatch 2 instellen

Kenmerken

Lees wat het product te bieden heeft en activeer alles.



Activiteitendoelen instellen

NOG NIET GEZIEN



Uw eerste elektrocardiogram uitvoeren

NOG NIET GEZIEN



Navigeren in ScanWatch 2

NOG NIET GEZIEN



Meldingen activeren

NOG NIET GEZIEN

Later voltooiën

Let op nu volgt de uitleg van het gebruik van het horloge.

Volg de stappen goed en lees alles goed door. Het horloge bevat vele opties.

De opties die wij selecteren zijn suggesties. Mocht u andere keuzes maken is dit geheel uw eigen keuze. Let op; hoe meer opties u selecteert of toestemming u geeft hoe sneller het horloge leeg zal zijn.

Instellingen kunt u altijd later in de Withings app aanpassen mocht dit nodig zijn.

Het is belangrijk dat u de Ecg functie accepteert en activeert anders kan het horloge geen Ecg maken.

Dit kunt u vinden als u het stappenplan hervat.

Mocht u voor extra opties kiezen, houd u er rekening mee dat uw arts of verpleegkundig specialist dit niet zal beoordelen.

Nu kunt u de installatie hervatten.

Let op de volgorde verschilt per installatie.

Selecteer **de aangegeven kolom**

Laten we ScanWatch 2 instellen

Kenmerken

Lees wat het product te bieden heeft en activeer



Activiteitendoelen instellen

NOG NIET GEZIEN



Uw eerste electrocardiogram uitvoeren

NOG NIET GEZIEN



Navigeren in ScanWatch 2

NOG NIET GEZIEN



Meldingen activeren

NOG NIET GEZIEN

Later voltooiën

Selecteer **Begrepen**



Bekijk uw voortgang op uw pols

De analoge subwijzerplaat op uw horloge volgt automatisch de voortgang van uw dagelijkse activiteit.

Begrepen

Selecteer aantal stappen die u wenst te behalen dagelijks en **bevestig**

← Hoeveel traint u?

We gebruiken deze info om nauwkeurige gegevens van uw apparaat te krijgen.



Regelmaat van de traini... **Beginner** >

Ons vertellen hoe vaak je traint helpt ons gepersonaliseerde inzichten te sturen

Dagelijkse stappendoel **10.000** >

Hoeveel stappen per dag wilt u halen?

Bevestigen

Selecteer **de aangegeven kolom**

Laten we ScanWatch 2 instellen

Kenmerken

Lees wat het product te bieden heeft en activeer alles.



Uw eerste electrocardiogram uitvoeren

NOG NIET GEZIEN



Navigeren in ScanWatch 2

NOG NIET GEZIEN



Meldingen activeren

NOG NIET GEZIEN



Scans ademhalingsstoornissen configureren

NOG NIET GEZIEN



Later voltooiën

Selecteer **Volgende**

Selecteer **Volgende**

Selecteer **Volgende**

Selecteer **Ik begrijp het.**
Selecteer **Accepteren en doorgaan**

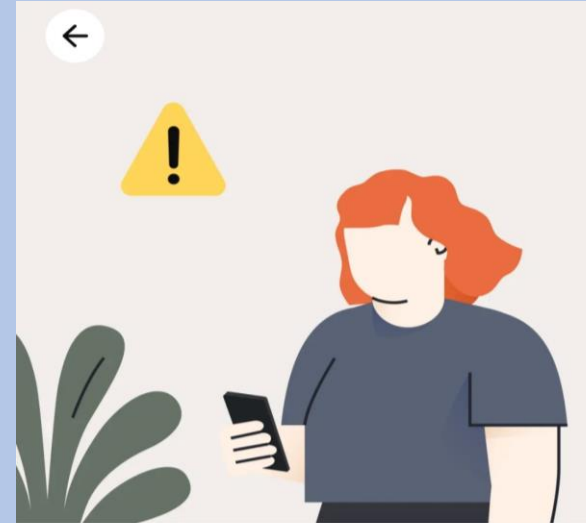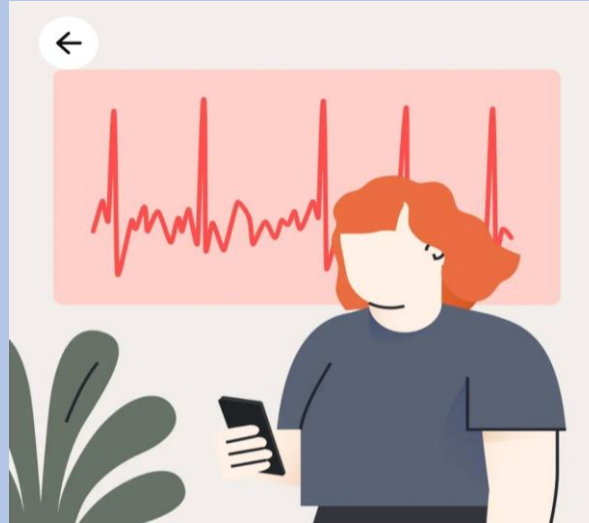

Wat is een ecg?



Bij elke hartslag gaat er een elektrische impuls golf door uw hart, waardoor het samentrekt en een pompbeweging maakt.



Een electrocardiogram (ecg) is de registratie van de elektrische signalen die door het hart worden geproduceerd.

Opmerking: Gebruik de Scan Monitor van Withings niet samen met een pacemaker, een Implantierbare Kardioverter-Defibrillator of andere geïmplanteerde elektronische apparatuur.

Volgende

Withings Scan Monitor kan AFib detecteren.



Boezemfibrilleren, ook bekend als AFib, is een abnormale hartslag.



Withings Scan Monitor kan onregelmatigheden in het ritme van uw hart detecteren en u op de hoogte stellen.

Volgende

Withings Scan Monitor kan hartaanvallen en andere medische aandoeningen niet detecteren.

Voelt u zich niet lekker of u denkt een hartaanval te hebben? Neem dan contact op met uw arts of de hulpdiensten.

Volgende

Gebruiksaanwijzing

U moet controleren en bevestigen dat u het volgende hebt begrepen:


U kunt deze functie niet gebruiken als u andere bekende hartritme stoornissen heeft. U moet de gebruiksaanwijzing doornemen voordat u verder kunt gaan.

Controleren

Ik begrijp het.

Accepteren en doorgaan

Selecteer **Volgende**

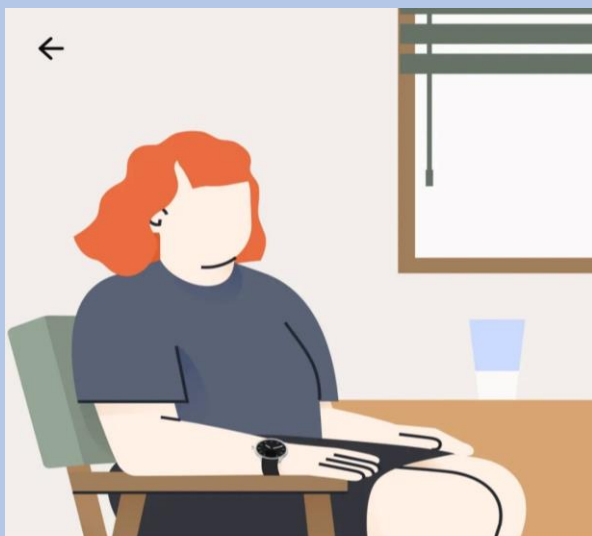


We gaan uw eerste ECG-meting uitvoeren!

- 1 Zit stil en praat niet.
- 2 Plaats uw arm op een tafel of armluning en ontspan.

① Het kan moeilijker zijn om een overtuigend ECG-resultaat te krijgen als u een andere band draagt dan silicone, FKM of gelijkwaardig.

Volgende

Selecteer **OK**

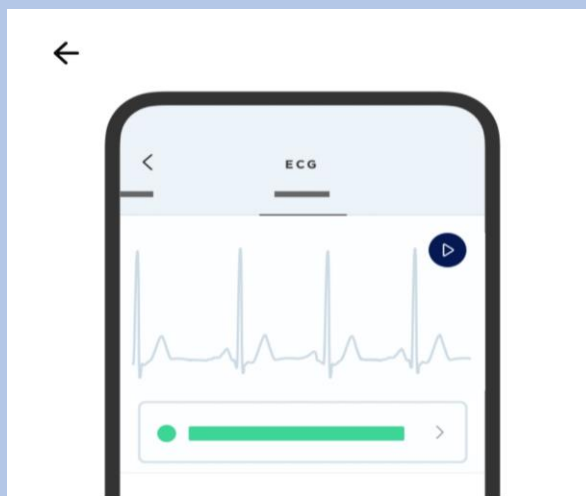

Dat was het! U vindt uw resultaten later in de app.

Als ScanWatch 2 atriumfibrilleren in uw ECG detecteert, krijgt u een duidelijke visualisatie en kunt u de opname opnieuw afspelen of naar uw arts sturen.

OK

Selecteer **de aangegeven kolom**

Laten we ScanWatch 2 instellen

Kenmerken

Lees wat het product te bieden heeft en activeer alles.



Navigeren in ScanWatch 2

NOG NIET GEZIEN



Meldingen activeren

NOG NIET GEZIEN



Scans ademhalingsstoornissen configureren

NOG NIET GEZIEN



Meldingen voor rustfrequentie hoge en lage hartslag configureren

NOG NIET GEZIEN

Later voltooien

Selecteer **Volgende**



Druk op de kroon om het horloge uit de sluimerstand te halen.

Zo krijgt u toegang tot functies op het apparaat.

Volgende

Selecteer **Volgende**



Draai aan de kroon om te bladeren, druk erop om te selecteren.

Als u aan de kroon draait, verandert het menu. Met een korte druk op de kroon bevestigt u de actie.



Volgende

Selecteer **het aangegeven kolom**

Laten we ScanWatch 2 instellen

Kenmerken

Lees wat het product te bieden heeft en activeer alles.



Meldingen activeren

NOG NIET GEZIEN



Scans ademhalingsstoornissen configureren

NOG NIET GEZIEN



Meldingen voor rustfrequentie hoge en lage hartslag configureren

NOG NIET GEZIEN



Uw eerste zuurstofsaturatiemeting uitvoeren

Later voltooiën

Kies zelf of u meldingen wilt ontvangen, vervolgens pijltje terug



Meldingen

Het horloge zal zachtjes trillen wanneer je een melding ontvangt.

Gezondheidsmeldingen

Stel in welke gezondheidsmeldingen u op het horloge wilt ontvangen.

Meldingen inschakelen

Het horloge zal zachtjes trillen wanneer je een melding ontvangt.



Binnenkomend telefoongesprek



Berichten




Selecteer **het aangegeven kolom**

Laten we ScanWatch 2 instellen

Kenmerken

Lees wat het product te bieden heeft en activeer alles.

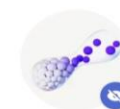

Scans ademhalingsstoornissen configureren

NOG NIET GEZIEN



Meldingen voor rustfrequentie hoge en lage hartslag configureren

NOG NIET GEZIEN



Uw eerste zuurstofsaturatiemeting uitvoeren


NOG NIET GEZIEN



Meer informatie over trainingen en GPS

Later voltooiën

Selecteer **Starten**

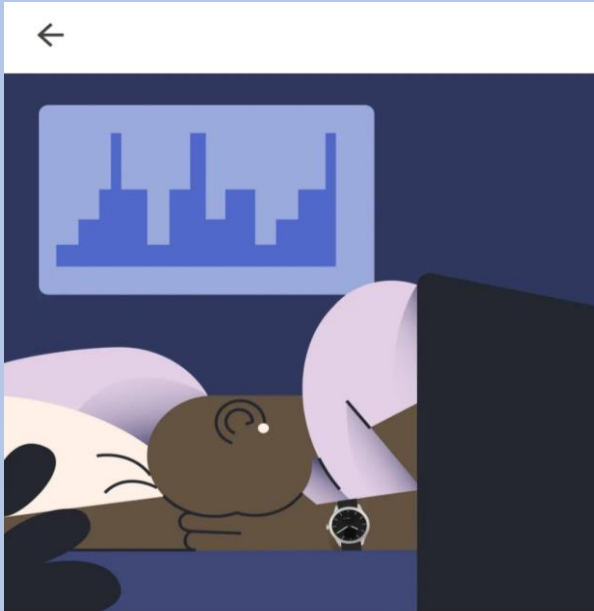


ScanWatch 2 houdt uw slaap automatisch bij wanneer u het horloge in bed draagt

ScanWatch 2 houdt uw slaapcyclus en slaaphartslag bij. U hoeft het horloge alleen te dragen, verder niets. U krijgt een overzicht van uw slaap wanneer u wakker wordt.

Starten

Selecteer **Volgende**

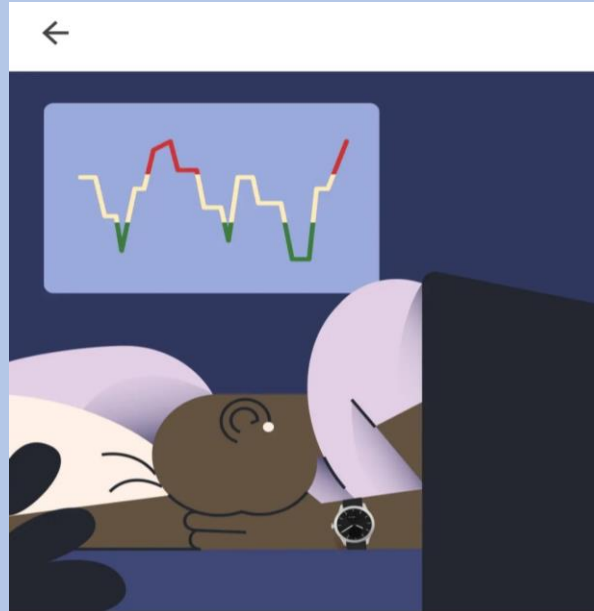


Verbeter slaaptracking met ademhalingscans

Als de functie Ademhalingsscan is ingeschakeld, kan ScanWatch 2 ademhalingsstoornissen detecteren, naast de standaardslaaptracking.

Volgende

Selecteer **Volgende**

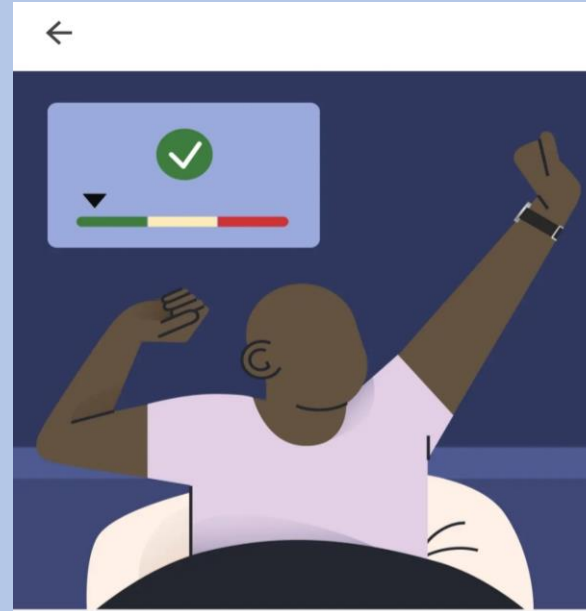


Het opsporen van ademhalingsstoornissen kan uw algehele welzijn verbeteren

Ademhalingsstoornissen kunnen een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van uw slaap en dus op uw algehele welzijn.

Volgende

Selecteer **Frequentie instellen**

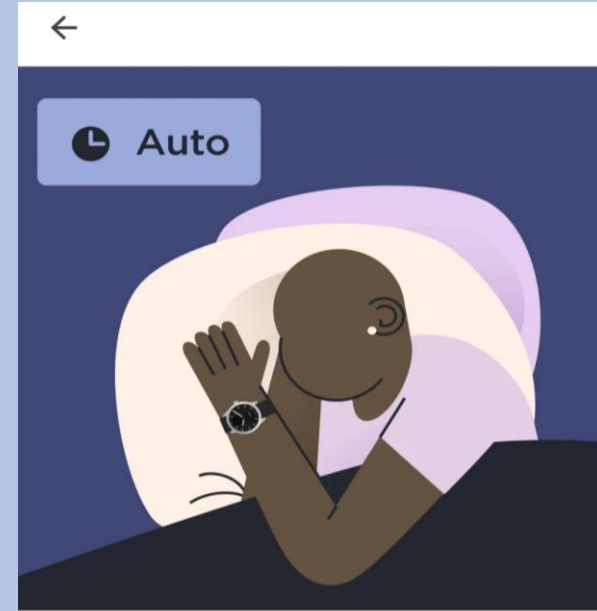


Ademhalingscans plannen

Om de levensduur van de batterij te sparen en omdat ademhalingsstoornissen zich niet snel ontwikkelen, raden we aan de frequentie in te stellen op "Automatisch".

Frequentie instellen

Selecteer hier uw eigen keuze en vervolgens **bevestigen**

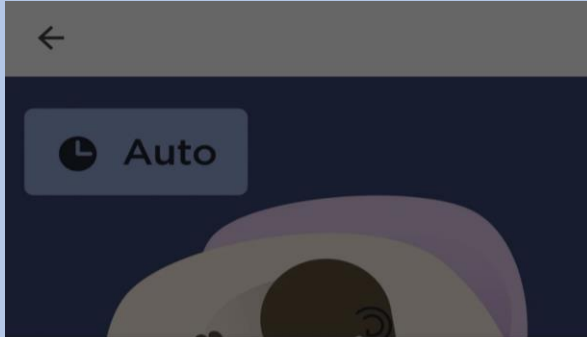


Ademhalingsscan

Hierdoor wordt de led van het horloge continu ingeschakeld om nauwkeuriger gegevens vast te leggen en het algoritme in staat te stellen om betere inzichten van uw nacht te genereren. Dit zal de levensduur van de batterij drastisch beïnvloeden.

- Uit**
Ademhalingsstoornissen worden niet gedetecteerd.
- Automatisch (aanbevolen)**
ScanWatch start automatisch een Ademhalingsscan op het beste moment, een paar keer per kwartier.
- Altijd aan**
U krijgt elke ochtend de resultaten. Maar let op, dit verkort de levensduur van de batterij.

Bevestigen

Selecteer **Volgende**

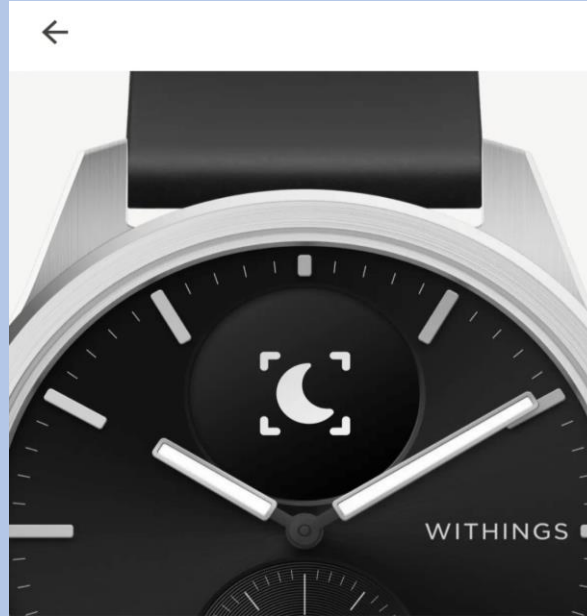


Krijg een herinnering voor een Ademhalingsscan

Houd dit symbool in de gaten op uw ScanWatch 2: het geeft aan dat er een Ademhalingsscan is gepland. U kunt ook naar de instellingen van de functie gaan om precies te weten wanneer de volgende gepland is.

Volgende

Selecteer **Begrepen**

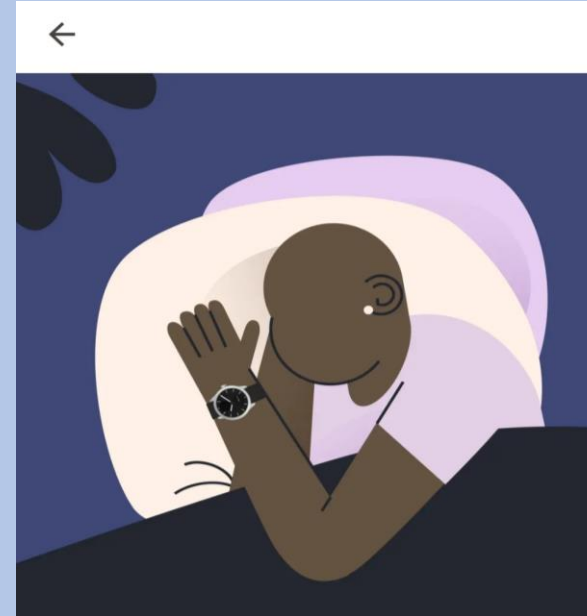


Klaar! Draag de ScanWatch 2 als u gaat slapen om gegevens te krijgen over ademhalingsstoornissen wanneer u wakker wordt.

Alles wordt automatisch getraceerd en gesynchroniseerd met Withings zodra u opstaat.

Begrepen

Selecteer **OK, begrepen**

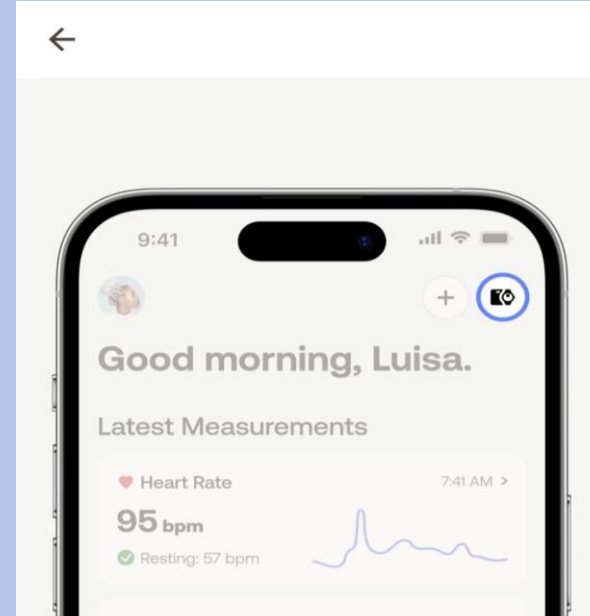

U kunt de ademhalingsscan later activeren op het tabblad Apparaten.

Ga naar het tabblad Apparaten van uw app, zoek uw apparaat op, ga naar "Alle instellingen" en activeer wat u nodig hebt.

Ok, begrepen

Selecteer het aangegeven kolom

Laten we ScanWatch 2 instellen

Kenmerken

Lees wat het product te bieden heeft en activeer alles.



Meldingen voor rustfrequentie hoge en lage hartslag configureren

NOG NIET GEZIEN



Uw eerste zuurstofsaturatiemeting uitvoeren

NOG NIET GEZIEN



Meer informatie over trainingen en GPS

NOG NIET GEZIEN




Ontdek de lichaamstemperatuur

NOG NIET GEZIEN

Later voltooien

Selecteer **Volgende**

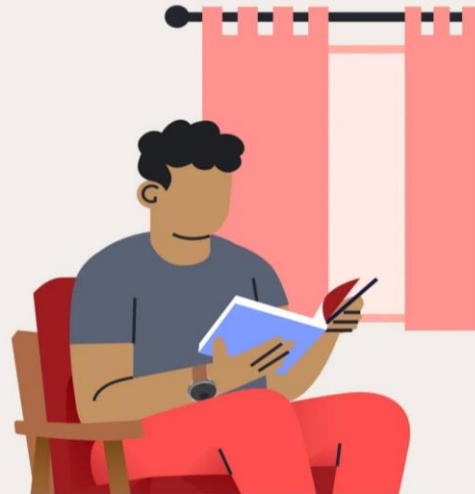

Wat is de hartslag in rust?

De hartslag in rust is uw hartslag terwijl u 10 minuten inactief bent. Een normale hartslag in rust ligt tussen 60 en 100 slagen per minuut, maar dit kan per persoon verschillen.

Volgende

Selecteer **Volgende**




Hoe werken HR-meldingen in rust?

Als uw hartslag in rust te hoog of te laag is, ontvangt u een melding. U kunt de drempelwaarden voor hoge en lage hartslag wijzigen in de instellingen.

Volgende

Selecteer **Activeer herinneringen**

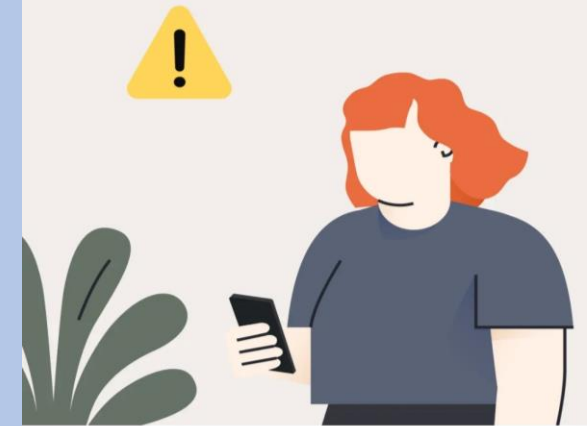


ScanWatch 2 kan hartaanvallen en andere medische aandoeningen niet detecteren.

Voelt u zich niet lekker of denk u dat u misschien een hartaanval hebt? Bel dan uw arts of de hulpdiensten.

Activeer herinneringen

Niet nu

Selecteer **OK**

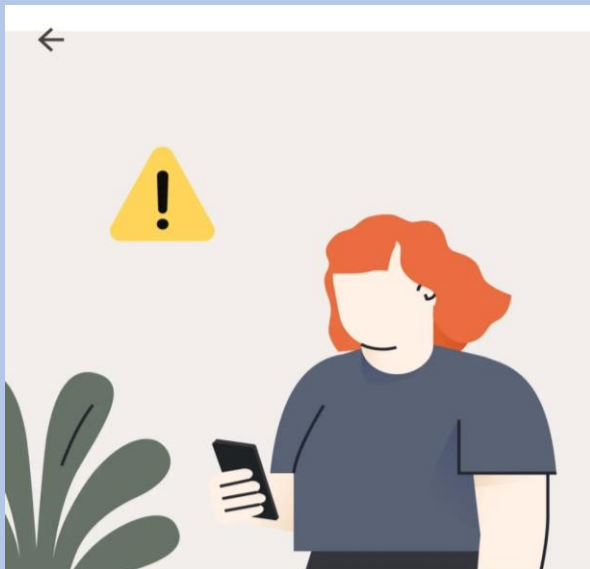

ScanWatch 2 kan hartaanvallen en andere medische aandoeningen niet detecteren.

Voelt u zich niet lekker of denk u dat u misschien een hartaanval hebt? Bel dan uw arts of de hulpdiensten.

OK

Selecteer het aangegeven kolom

Laten we ScanWatch 2 instellen

Kenmerken

Lees wat het product te bieden heeft en activeer alles.



Uw eerste zuurstofsaturatiemeting uitvoeren

NOG NIET GEZIEN



Meer informatie over trainingen en GPS

NOG NIET GEZIEN



Ontdek de lichaamstemperatuur

NOG NIET GEZIEN




Volg uw menstruatiecyclus

NOG NIET GEZIEN

Later voltooien

Selecteer **Starten**

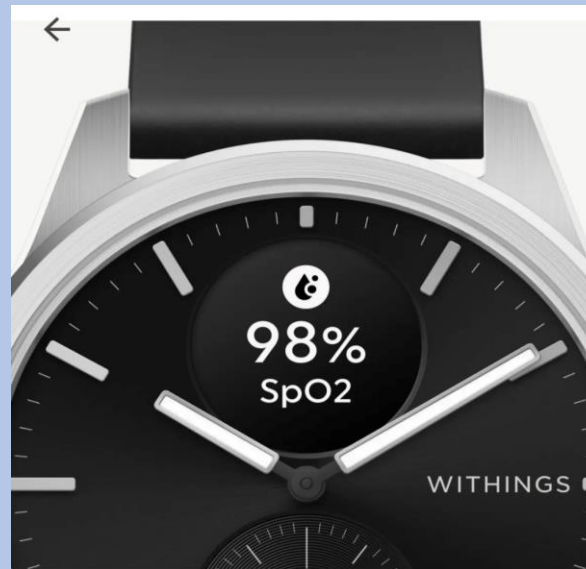


De ScanWatch 2 kan het zuurstofgehalte in uw bloed meten

Zuurstofsaturatie van arteriële hemoglobine (of SpO2) beoordeelt de hoeveelheid zuurstof in uw rode bloedcellen. Elke meting wordt op het horloge uitgevoerd en duurt 30 seconden.

Starten

Selecteer **Volgende**

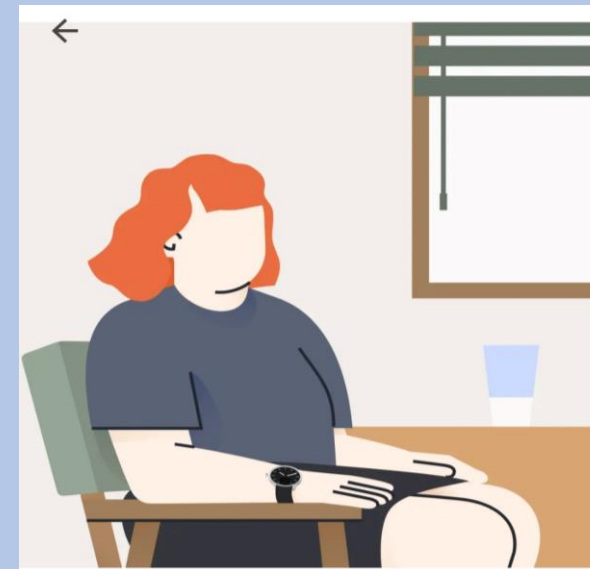

We gaan uw eerste zuurstofmeting doen.


- 1 Blijf stilzitten, praat niet en ontspan.
- 2 Plaats uw arm en elleboog op een tafel of armleuning.
- 3 Zorg dat uw polsband strak zit en houd de palm van uw hand open en plat.

Volgende


Selecteer **Over slaan**



Selecteer **Begrepen**

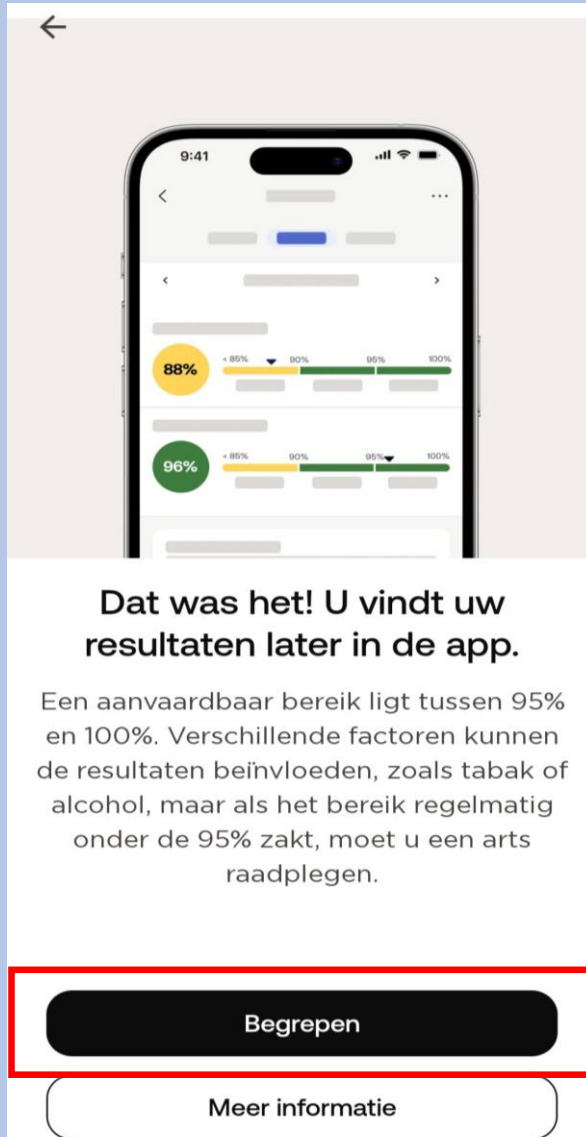

Selecteer **het aangegeven kolom**

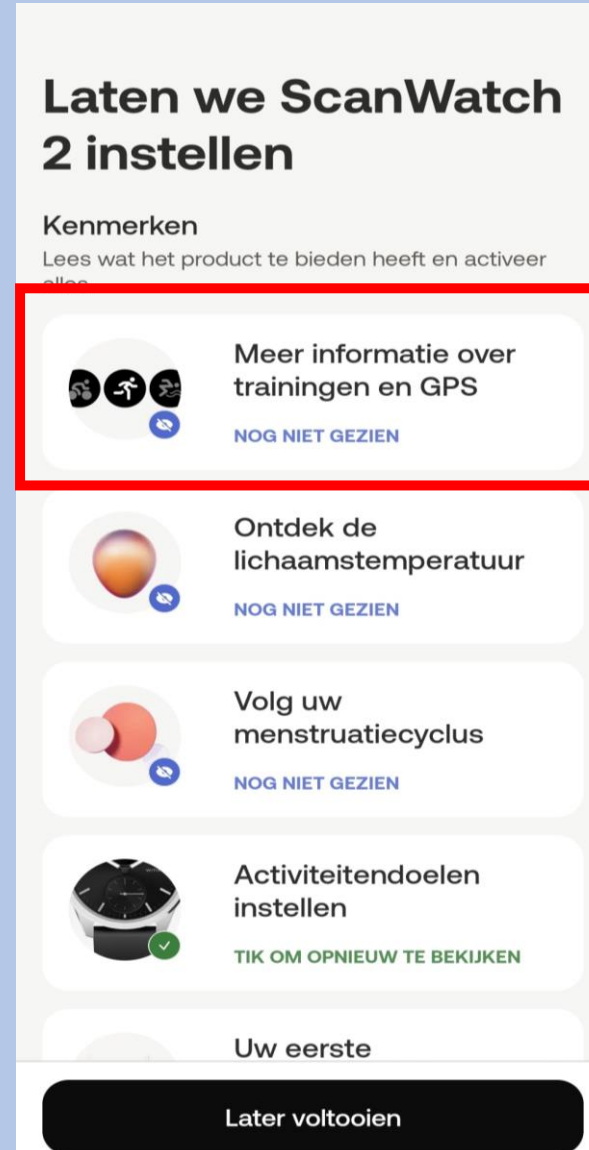

Selecteer **Volgende**



Selecteer **Volgende**



Druk kort om uw training te selecteren en de sessie te starten

Blader door het trainingsmenu. Selecteer uw training met een korte druk op de knop om onmiddellijk te beginnen met het bijhouden van uw training.

Volgende

Selecteer **Volgende**



Druk lang op de kroon om de training te pauzeren of te beëindigen.

Als u lang op de kroon drukt, pauzeert u de training. Draai vanaf hier om de training te stoppen en druk lang om te bevestigen.

Volgende

Selecteer **Volgende**



Houd uw sessies bij en volg uw voortgang

Tijdens een training controleert ScanWatch 2 voortdurend de hartslag, duur, verbrande calorieën, aantal stappen en het kan zelfs uw route in kaart brengen.

Volgende

Selecteer **Activeer herinneringen**



Gebruik uw telefoon om meer uit uw sessie te halen

Geef Withings toegang tot uw positie om real-time GPS-gegevens op te halen en meer statistieken vast te leggen, waaronder route, afstand en tempo.

Activeer herinneringen

Selecteer **Toestaan bij gebruik van app** en pijl terug



Selecteer **Activeer herinneringen**




Selecteer **Ok, begrepen**



Selecteer **Ok, begrepen**



Selecteer **OK**

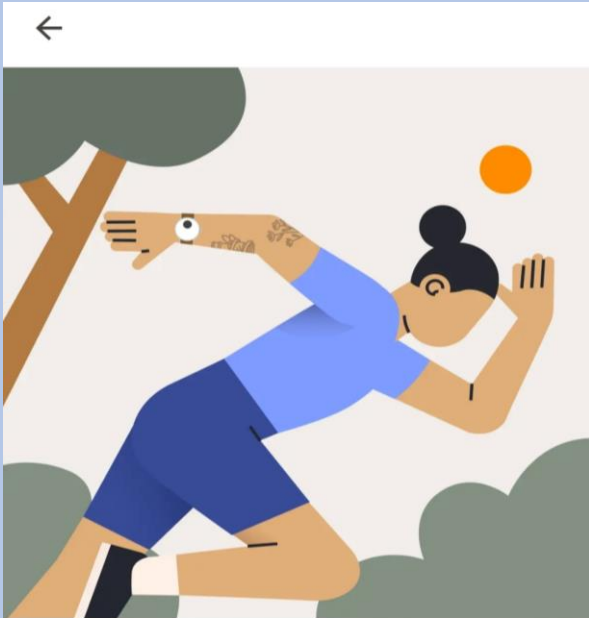

Klaar! U kunt nu trainen.

We hopen dat alles eenvoudig en duidelijk was. U kunt deze uitleg overigens altijd opnieuw raadplegen in het onderdeel Apparaten van de Withings-app.

OK

Selecteer het aangegeven kolom

Laten we ScanWatch 2 instellen

Kenmerken

Lees wat het product te bieden heeft en activeer alles.



Ontdek de lichaamstemperatuur

NOG NIET GEZIEN



Volg uw menstruatiecyclus

NOG NIET GEZIEN



Activiteitendoelen instellen

TIK OM OPNIEUW TE BEKIJKEN



Uw eerste electrocardiogram uitvoeren

TIK OM OPNIEUW TE BEKIJKEN

Later voltooiën

Selecteer **OK**



Ontdek de lichaamstemperatuur



Meer kennis over uw lichaam met 24/7 doorlopende tracking.



Ontdek temperatuurschommelingen die kunnen wijzen op een beginnende ziekte of andere aandoening.



De cursor toont het verschil tussen uw huidige en gemiddelde temperatuur (basislijn), ook aangegeven door het onderstaande getal.

OK

Selecteer het aangegeven kolom

Laten we ScanWatch 2 instellen

Kenmerken

Lees wat het product te bieden heeft en activeer alles.



Volg uw menstruatiecyclus

NOG NIET GEZIEN



Activiteitendoelen instellen

TIK OM OPNIEUW TE BEKIJKEN



Uw eerste electrocardiogram uitvoeren

TIK OM OPNIEUW TE BEKIJKEN



Navigeren in ScanWatch 2

TIK OM OPNIEUW TE BEKIJKEN

Later voltooiën

Selecteer uw eigen keus

Selecteer **Ok**

Scanwatch 2 informatie

- De Scanwatch 2 is spatwater dicht en er kan mee gedoucht worden. Zwemmen wordt niet geadviseerd.
- Maak altijd een ECG met het horloge om de pols welke u aangegeven heeft bij installatie.
- Het horloge kan uw slaapregistratie bijhouden als u deze 's nachts omhoudt. Dit hoeft overigens niet, deze gegevens worden niet nagekeken.
- De Scanwatch 2 werkt op een accu en moet regelmatig opgeladen worden. De oplader vindt u in de verpakking.



Welkom bij Volg uw menstruatiecyclus

Door uw menstruatiecyclus te volgen krijgt u niet alleen inzicht in de periode wanneer uw menstruatie en de eisprong waarschijnlijk plaatsvinden, maar krijgt u ook uitgebreide hoogwaardige informatie over de invloed van uw menstruatiecyclus op uw activiteiten, lichaam, hart en slaap.



Volg en analyseer gegevens zoals menstruatie, symptomen en

Start

Niet geïnteresseerd

Laten we ScanWatch 2 instellen

Kenmerken

Lees wat het product te bieden heeft en activeer alles.



Activiteitendoelen instellen

TIK OM OPNIEUW TE BEKIJKEN



Uw eerste elektrocardiogram uitvoeren

TIK OM OPNIEUW TE BEKIJKEN



Navigeren in ScanWatch 2

TIK OM OPNIEUW TE BEKIJKEN



Meldingen activeren

TIK OM OPNIEUW TE BEKIJKEN

OK

Het maken van een ECG.


- Doe uw horloge op de juiste pols.
- Open de Withings app als u een ECG gaat maken.
- Druk eenmaal de knop aan de zijkant in.
- Draai aan het kroontje tot u Ecg ziet verschijnen in het kleine schermje van het horloge.
- Druk eenmaal goed de knop in als u Ecg ziet op het horloge.
- Leg uw vingers om het horloge zoals op de afbeelding aangegeven word.
- Op uw telefoon verschijnt een aftel scherm houdt u hand op het horloge tot die tweemaal trilt en u op de app 0 ziet.
- In de app verschijnt de uitslag en mag u op OK tikken.



App lay-out

Handmatig
invoeren metingen

Lijst van
apparaten

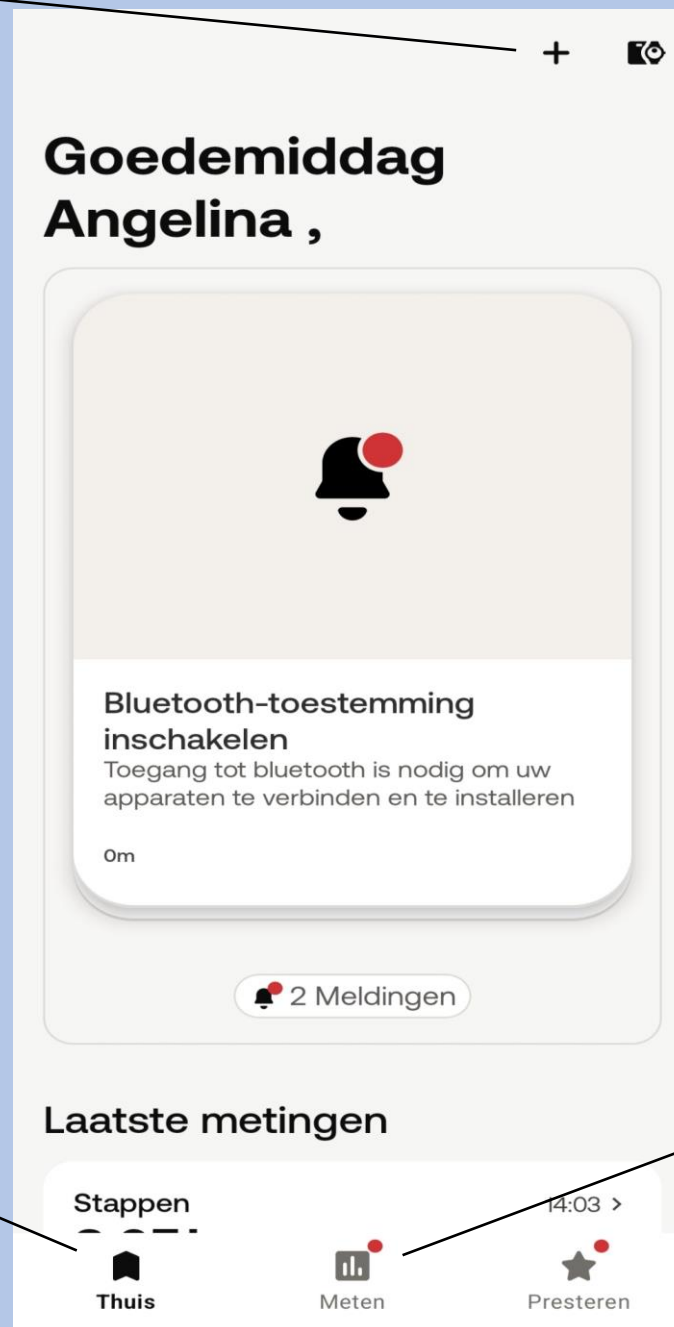

Meest recente
metingen

Alle gemaakte
metingen

Inloggen LUMC Care app

Selecteer **Aanmelden**

Welkom bij LUMCcare app

Kies hieronder voor "aanmelden" en doorloop de stappen samen met uw arts of begeleider.

Aanmelden

Selecteer **Hartinfarct box** en Vervolgens op **Volgende**

← Stap 1

Van welke **box** bent u deelnemer?

Hartinfarct box

Hartfalen box

LVAD box

Zwangeren box

Covid-19 box

Basis box

Volgende

Voer hier het **E-mailadres** en **Wachtwoord** in die u van het ziekenhuis ontvangen heeft zie **afbeelding 1**

← Stap 2

Wat zijn uw **HLC gegevens?**

Vul hier het e-mailadres en password in dat uw arts voor u heeft aangemaakt:

@hlc.nl

.....

Volgende

Afbeelding 1



LUMC Leids Universitair Medisch Centrum
TheBox

Patentgegevens

Account

Uw persoonlijke accountgegevens

Inlognaam

Wachtwoord

Intrik deze gegevens om in te loggen of accounts aan te maken de benodigde applicaties.

TheBox en de apparaten zijn geen vervanging voor spoedeisende zorg!
Heeft u spoedeisende zorg nodig, bel dan het alarmnummer 112

Op www.hartlongcentrum.nl/thebox ziet u onder Handleidingen toe u stap voor stap de apparaten kunt installeren.

www.hartlongcentrum.nl/thebox



Technische ondersteuning: U kunt bij problemen eerst op www.hartlongcentrum.nl/thebox onder Veelgestelde vragen. Komt u er dan nog niet uit: boxsupport@lumc.nl - 071-5297 604 (aanwezig van maandag t/m vrijdag van 9 tot 12 uur)

Selecteer **Verbinden**

Voer hier nogmaals het **E-mailadres** en **Wachtwoord** in die u van het ziekenhuis ontvangen heeft zie **afbeelding 1**.
Selecteer vervolgens op **Aanmelden**.

Afbeelding 1

Selecteer **Gebruik deze app**

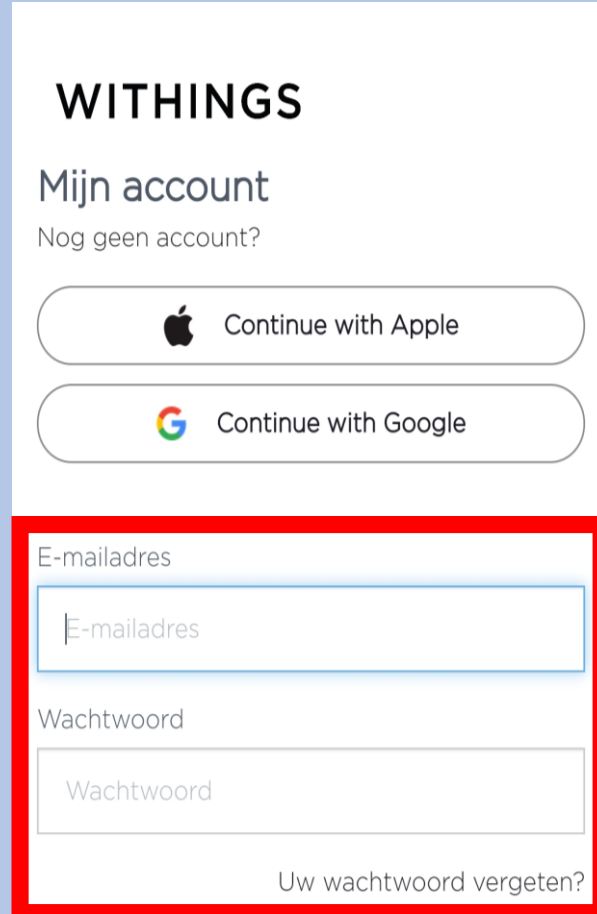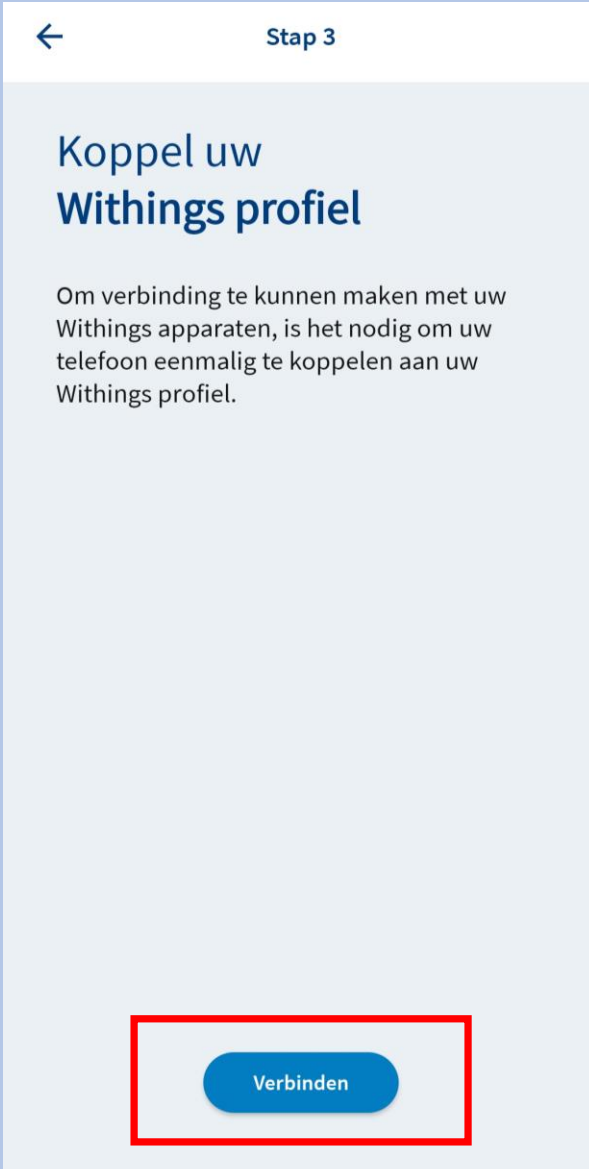

Bent u dit niet?

Kies hoe u aangesproken wil worden en selecteer vervolgens **Volgende**

Kies nu een code die u gaat gebruiken voor de app en onthoud deze goed. Let op 0000 en 1234 word niet geaccepteerd

← **Stap 4**

Hoe wordt u graag aangesproken?

Dhr. Testpatient

A. Testpatient

A.

Volgende

Detailed description: This is a mobile app screen titled 'Stap 4' with a back arrow. The main heading is 'Hoe wordt u graag aangesproken?'. Below it are three white text input fields. The first field contains 'Dhr. Testpatient', the second 'A. Testpatient', and the third 'A.'. A red rectangular box highlights these three input fields. At the bottom of the screen is a blue rounded button labeled 'Volgende'.

← **Stap 5**

Maak een **pincode** aan om mee in te loggen

Deze pincode heeft u nodig wanneer u gebruik wilt maken van de app.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Detailed description: This is a mobile app screen titled 'Stap 5' with a back arrow. The main heading is 'Maak een pincode aan om mee in te loggen'. Below it is a sub-heading: 'Deze pincode heeft u nodig wanneer u gebruik wilt maken van de app.'. There are four empty square boxes for entering the PIN code. At the bottom is a numeric keypad with buttons for digits 1-9, 0, a backspace key (⌫), a 'Ger.' key, a decimal key (.-), and a comma key (,).

U bent nu ingelogd in de LUMC Care app


Hierin kunt u laagdrempelig uw metingen inzien. Helaas is uw ECG nog niet zichtbaar wij hopen op uw begrip hiervoor.

Mocht u, uw meting niet direct zien in de LUMC care app dan kunt u eerst Withings hiervoor openen.

Nu volgt een korte uitleg over het gebruik van de LUMC Care app.


Gebruik LUMC Care app

Per dag kunt u een vragenlijst invullen die doorgestuurd wordt naar uw patienten dossier
Let op dit kan maar 1 keer per dag en kan niet aangepast worden halverwege de dag.

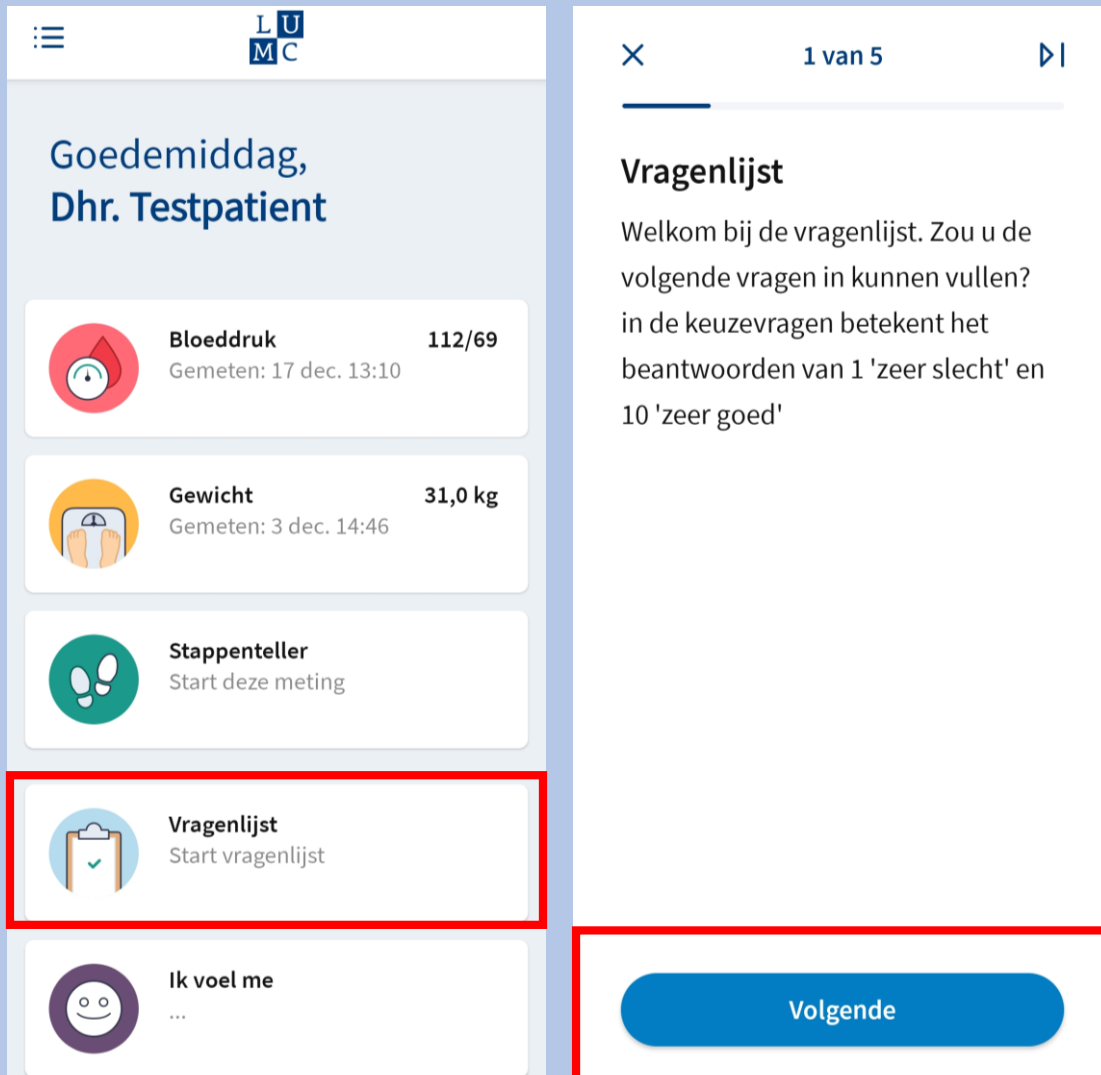

Per dag kunt u aanvinken hoe u zich voelt.

Let op dit kan maar 1 keer per dag en kan niet halverwege de dag aangepast worden.

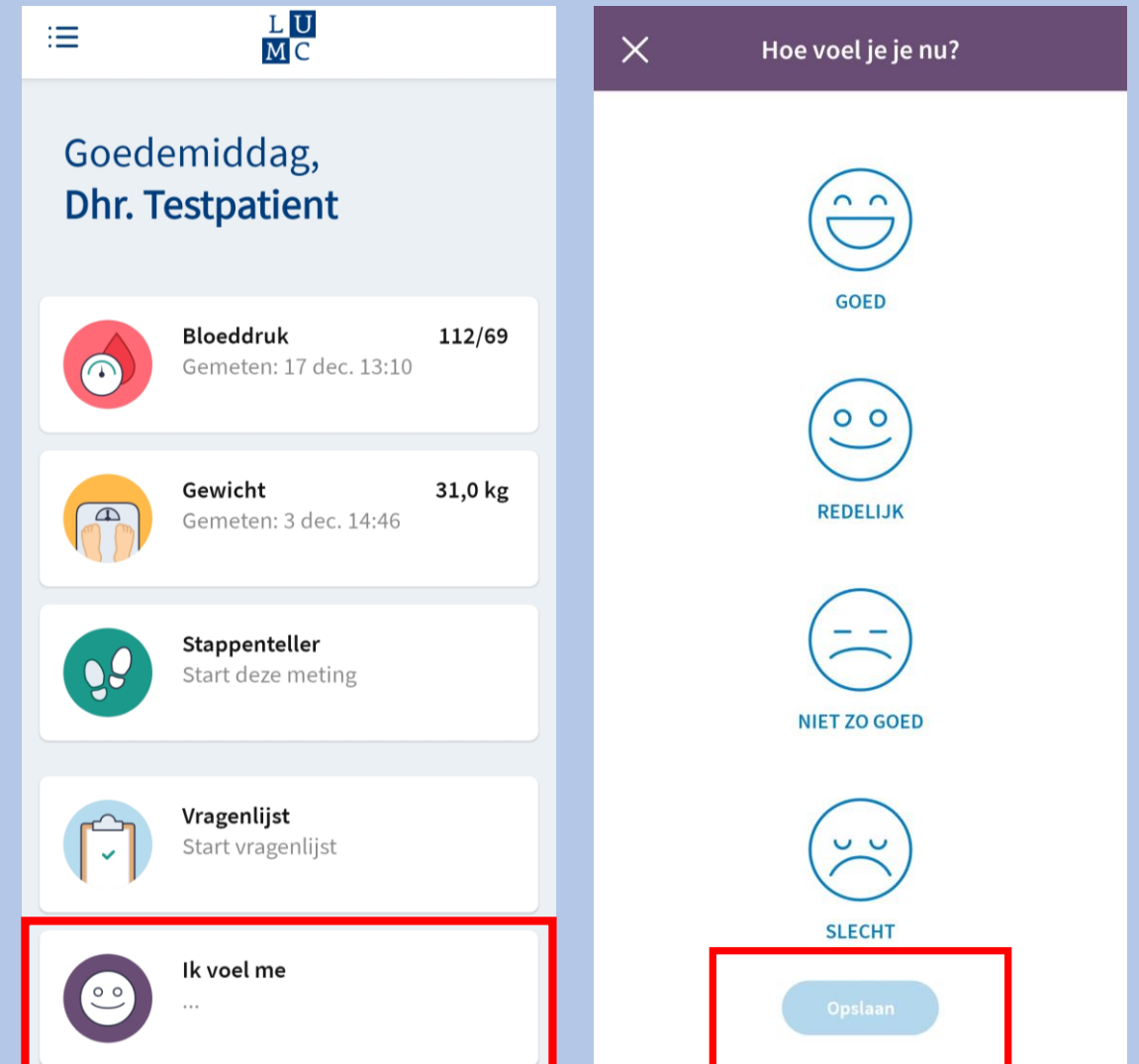



Patientgegevens

Patientnr
Naam
Telefoon

Account

Bloeddrukmeter



Serienr 0024E495B340
Te gebruiken 1 keer per dag
gedurende 2 weken

Uw streefwaarden:

	Bovendruk / Onderdruk
Ondergrens	90 / 60 mm Hg
Streefwaarde	120 / 80 mm Hg
Bovengrens	145 / 90 mm Hg

▶ Meet uw bloeddruk in rust, circa 1 uur na het innemen van uw medicatie, op een vast tijdstip van de dag onder dezelfde omstandigheden.

Weegschaal



Serienr 0103700546704956210024E
Te gebruiken 1 keer per dag
gedurende 2 weken

Huidig gewicht kg
Streef gewicht kg

▶ Meet uw gewicht op een vast tijdstip van de dag onder dezelfde omstandigheden.

Move ECG



Serienr 3700546705991
Te gebruiken 1 keer per dag
gedurende 2 weken

Streefwaarde 5000 stappen per dag

Uw persoonlijke accountgegevens

Inlognaam
Wachtwoord

Gebruik deze gegevens om in te loggen of accounts aan te maken in de benodigde applicaties.

Scan de QR-Code om de website te openen van TheBox thuismeetapparatuur. Daar kunt u alle informatie vinden omtrent The Box zoals installatie, instructiefilmpje en meest gestelde vragen.



VOOR TECHNISCHE SUPPORT KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN

- ☐ Telefonisch tussen 9:00 en 12:00 op 07604 (maandag tot en met vrijdag)
- ☐ Per e-mail: boxsupport@lumc.nl

Hoe vaak een meting?

U heeft van het LUMC een fomulier meegekregen zoals hiernaast staat afgebeeld.

Op dat formulier staat per apparaat hoe vaak u een meting moet doen per week. Heeft u hier vragen over bespreek dit dan met uw behandelend specialist op uw eerst volgende afspraak.

Let op per persoon verschilt het welke apparatuur u heeft en welke meetfrequentie van kracht is.

Let op!

“The BOX” is een extra dienst binnen uw zorgtraject van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). De thuismeetapparatuur is bedoeld om uzelf te monitoren.

Deze apparatuur is geen vervanging voor medisch advies of de diagnose van een arts. Als patiënt blijft u zelf verantwoordelijk voor het vragen van extra hulp wanneer dat nodig lijkt.

Heeft u spoedeisende klachten, bel dan 112.

Heeft u gezondheidsklachten die niet tot het volgende contactmoment kunnen wachten en maakt u zich zorgen, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de hartpoli via hartpoli@lumc.nl of 071-5263714.

Buiten kantooruren adviseren wij u contact op te nemen met uw huisarts of de huisartsenpost.

Heeft u een vraag over de thuismeetapparatuur en het koppelen van de apparaten, neem dan contact op met het team van The Box. Let op dit is alleen voor technische vragen. De afdeling boxsupport kan niet helpen bij medische vragen. Email: boxsupport@lumc.nl. Vermeld altijd uw naam en geboortedatum in uw email.

Telefonisch bereikbaar: maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 tot en met 12:00 uur op 071-5297604.

Op de website www.hartlongcentrum.nl/thebox staat alle informatie omtrent The Box. Hier vindt u bijvoorbeeld het stappenplan voor het installeren van uw box.



Einde installatie en uitleg the box

Dank u wel voor uw aandacht en mocht u nog vragen hebben dan horen wij het graag.

- Tel : 071-5297604 (9:00 – 12:00)
E-mail: boxsupport@lumc.nl

Vriendelijke groet,
Team Box Support

